

创造全新的每一天

经营理念

- ◆ 为了实现丰富多彩，舒适安乐的生活，我们不断创造革新，做出贡献！
- ◆ 为了适应多样化、老龄化社会的需求，我们提供前所未有的产品及服务。
- ◆ 老龄化飞速发展的中国，老龄化速度已达世界最高水平，但在护理、医疗、健康相关产品的服务方面却不能说非常到位。
- ◆ 长者的身体状况在不断发生变化，我们在掌握多样化的需求的同时，还要创造出前所未有的、丰富多彩的、暖心的产品及服务。
- ◆ 以世界通用商品和服务，贡献全社会。


Create a new day

Operation principle:

- ◆ In order to achieve affluent and comfortable life, we constantly create innovation and make contribution
- ◆ In order to adapt to the demand of diversity and aging society, we provide unprecedented products and services.
- ◆ The aging population is developing rapidly in China and the rate of aging has reached its highest level, but the services about nursing, medical health and other related services are not perfect enough
- ◆ As the physical condition of the elderly keeps constantly changing, we need to create unprecedented, affluent, heart-warming products and services while mastering the diverse needs.
- ◆ Contribute to the whole society with universal products and services.

世界老龄化率的比较

Comparison of world aging rate

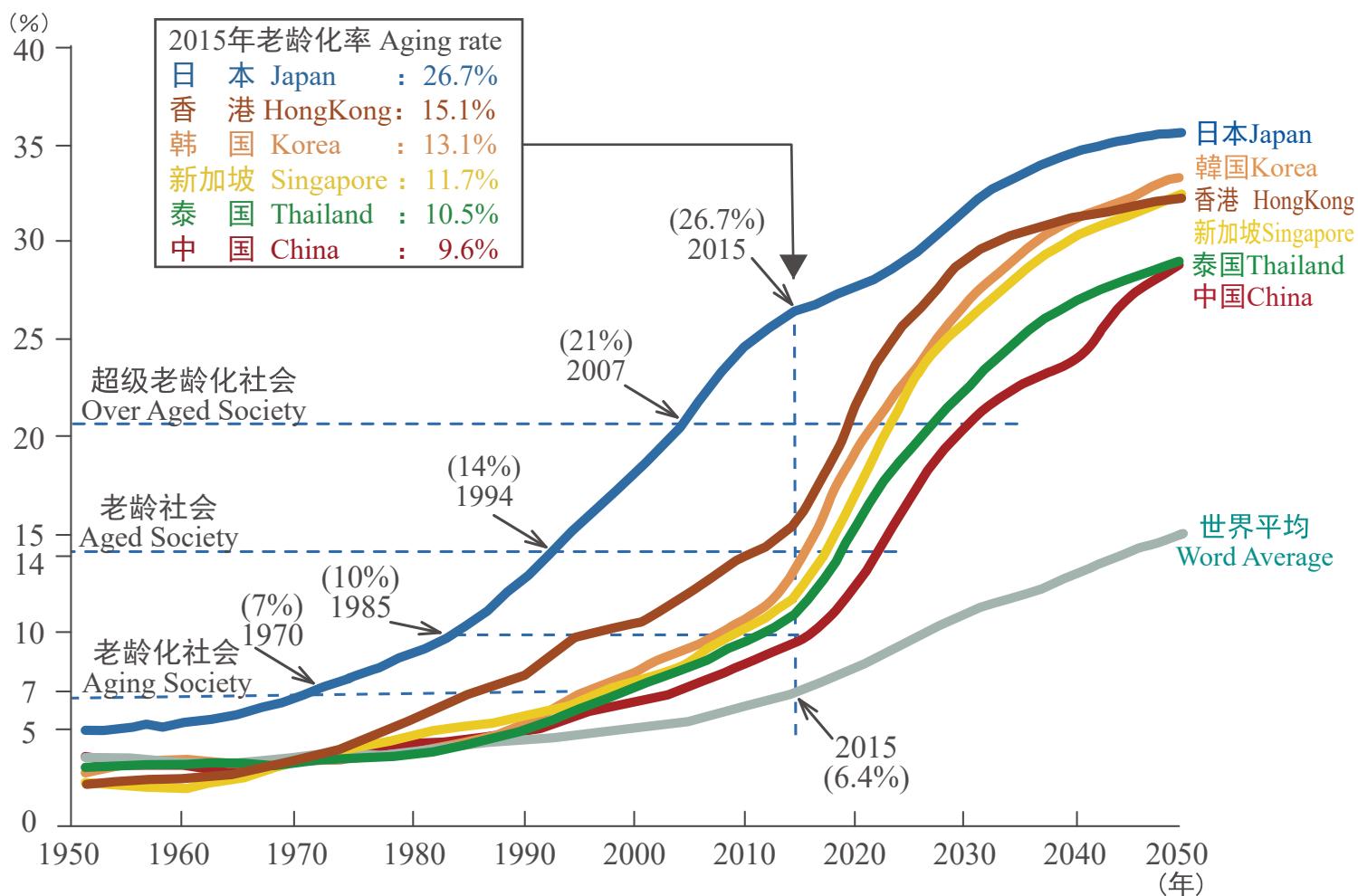

目录 Contents

居家·保健用品

家居风电动床与床垫

Home furnishing and health articles

Household bed and mattress · · · · · 4



高级羽绒被

High quality down quilt · · · · · 10



枕头

Pillow · · · · · 12



全身指压按摩器

Whole-body Shiatsu Massage machine · · 14

福祉用品

电动护理床与床垫

Medical and nursing appliance

Electric adjustable bed and mattress · · · 16



护理床配套用品与床上用品

Bed matched products and beddings · · · 24



生活支援用品

Daily Life support · · · · · 30



移动支援用品

Moving support · · · · · 32

经销产品

Commodity · · · · · 35


轮椅

漳州立泰医疗康复器材有限公司



轮椅坐垫

上海鹰野商贸有限公司

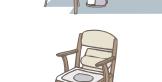

助行手推车 / 坐便椅 / 洗澡椅

ARON 化成株式会社




医疗步行鞋

旭履鞋业（上海）有限公司



扩听器

伊吹电子株式会社




组合家具 / 日式折叠推拉门

昆山海特木业有限公司



墙壁扶手 / 顶天立地扶手

松六株式会社



塑胶卷材

东璃（上海）贸易有限公司



环保壁纸

北京日经丽彩科贸有限公司

清洗消毒设备

Cleaning and disinfecting equipment · · 43

咨询服务

Consulting service



租赁服务

Rental service · · · · · 46



适老化改造·照护体系图

Aging modification · · · · · 48



公司介绍

Campany profile · · · · · 51

家居风电动床·床垫·附属品一览表

Home style electric adjustable bed·Mattress·Accessories

电动床 Electric bed 三马达/二马达 Three motors/ two motors 床板宽幅 Board width 122/97cm	Bostevo  5P	EZ-131  5P	GRANMAX  6P
床垫 Mattress 减腹压滑动弹簧床垫 RH-FK-DLX Slide spring mattress	 9P	 9P	 22P
床垫 Mattress 可弯折弹簧床垫 RH-THF Bendable spring mattress	 9P	慢回弹海绵床垫 MS-02 Slow-rebound mattress	温度调节床垫 LT Temperature adjusting mattress
脚部 Foot	 脚轮 Caster	 脚轮 Caster	 固定脚 Fix foot
头尾板 Head and foot board	 BK 黑色 Black 5P	 ESO 浅橡木 Light oak 5P	 ESW1 棕色 Brown GX-01F ESW1 GX-03F-SAM GX-04C-ESW1 7P
护栏 Side rail	 GX-HR-ESW1 6P	 GR505N 24P	 GR510-IV(BR) 24P
	 SR-100JJ-IV/SR-100JJ-BR 24P	 SR-106JJ-IVLO/SR-106JJ-BRDO 24P	 SR-300JJ-IV/SR300JJ-BR 24P
	 SPF-505 24P	 GR07C-IV(BR) 24P	 SR-800JJ-IV 24P

家居风电动床

五段式床板

三马达

二马达

双轮脚轮

直脚



Home style electric adjustable bed

Bostezo

舒适宽敞的家居电动床具“Bostezo”
A voluminous sized electric adjustable bed



床体用进口优质皮革包裹
The bed is wrapped with imported high quality leather.




无线遥控器款

BO-08 BK

采用独有的W马达系统和双尺寸的床垫和框架。独特的W马达系统，使其能够顺畅地运行。

The unique W motor system and double size mattress and frame are adopted. The unique W motor system enables it to run smoothly.

●2M (2 motors)×2

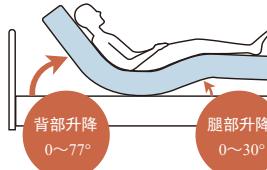

规格
尺寸: W1540 × L2240 × H930mm
材质: 皮革 (部分合成皮革)
优质钢材
重量: 124kg

额定消费功率: 160W

EZEX



EZ-131

3马达/脚轮款 (ESW1)/无线遥控器
床垫组合示例: RX-THF可弯折弹簧床垫

ESO ESW1



家居风电动床

Home style electric adjustable bed



通过对性能与设计的不断探索追求
打造您期待的优质舒适空间。
Through the continuous exploration of
performance and design, build a comfortable
space for you.

Quality

上乘的品质 High quality

优雅的家居风设计 Elegant home design

舒适轻松的家居风格，配以电动功能，追求品质和设计的双重享受。FranceBed值得信赖的品质和精练的设计完美融合，细节部分也完美呈现。

Comfortable and easy home style, equipped with electric function, pursuit of quality and double enjoyment of design. FranceBed's high quality and design matches perfect.



GX-03



GX-04

Technology

高度舒适感 High sense of comfort

在电动床的高业绩与先进的技术中诞生了FranceBed的“贴合人体的完全曲线”。感受最高品质的援助，在床上看书、观看电视、睡眠…… 尽享舒适生活。

‘Match well with body’ was born under high achievement and advanced technology. Feel the highest quality and enjoy comfortable life, read books, watch TV and sleep.



FranceBed的“贴合人体的完全曲线”，
与身体曲线自然吻合，给到头·颈·背部
舒适的支撑。减轻对腹部的压迫感。

Match well with body curve, support your
head, neck and back. Ease the pressure to
your abdomen.



VS系列全款均配置
德国高精度马达
Germany
High-precise motor

自由选择脚轮或固定脚
Free to choose



GX-HR-ESW1 高级木制护栏

颜色：棕色 Brown

包装：1个/箱

产品主材：木制 Wooden

尺 寸：

L700xH435mm



高档木质护栏更彰显华丽家居品味，插入式的设计可根据需要放置床头、床中、床尾侧都设有孔洞。

High-quality side rail shows Luxuriant home taste.
Side rail can be placed at the head side, middle or foot side.



五段式床板

三马达

双轮脚轮 / 直脚



高度调节

背部升降

腿部升降

背部腿部同时升降

家居风电动床

高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护体系改造图

公司介绍



古典优雅 Elegance



VS-MM/SM32C-BR-GX03

尺 寸：M:1322×L2055×H265~625mm
S:1072×L2055×H265~625mm
床头板高：H818~1178mm

简洁大方 Simplify



VS-MM/SM32C-BR-GX01

尺 寸：M:W1312×L2056×H265~625mm
S:W1062×L2056×H265~625mm
床头板高：H818~1178mm

舒适便捷 Convenience



VS-MM/SM32C-BR-GX04

尺 寸：M:1312×L2198×H265~625mm
S:1068×L2198×H265~625mm
床头板高：H1158~1518mm



头板两侧均可放置手机等随身小物件

Small objects like mobile phone can be placed on both sides of the head board.

VS系列特点 Feature :

床架颜色：深棕Dark brown


床架主材：优质冷轧钢板high-quality steel

环氧粉体烤漆epoxy powder coating

床板材料：钢丝Steel mesh

床头床尾板：木质，棕色Wood, brown

适用床垫：M:W1220mm;S:W970mm

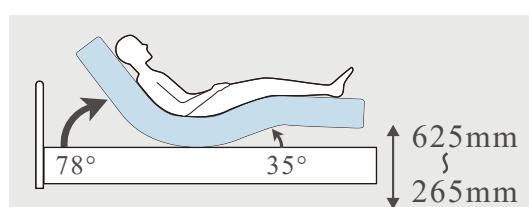

额定功率：180W
床体功能：背部升降：0~78°
脚部升降：0~34°
背部脚部同时升降
床的高低升降：H265~625mm

家居风电动床

四段式床板

二马达

/ 一马达

直脚

FranceBed 制日本进口商品



Home style electric adjustable bed



家居风电动床PLEOX系列

PLEOX
Premium

共同度过舒适时光的好伙伴，是安全性好的、值得信赖的产品。
A good partner who spends time together is a safe and trustworthy product.



DWN POK

PO-F3



使用高品质的马达来控制整床安全平稳的升降
Use the high quality motor to control the safe and stable rise and fall of the whole bed.



床架高度
230mm

床架高度
305mm

床架高度2段可调节 2 sections' height of the bed can be adjusted
根据使用者的使用安全和舒适度，装配时选择易于离床站立的高度
According to the user's safety and comfort, the height which is easy to stand up from the bed can be adjusted.



DWN POK

PO-C4

背部·腿部联动升降或独立升降
Synchronized rise and fall of back and leg part or rise or fall separately

功能 PO-F3

背部升降: 0~65°

脚部升降: 0~35°

尺寸: W1072xL2039xH820mm

(床板高度: 230mm,305mm)

背部腿部联动或独立升降

适用床垫尺寸: W970×L1950mm

功能 PO-C4

背部升降: 0~65°

脚部升降: 0~35°

尺寸: W1072xL2221xH840mm

(床板高度: 230mm,305mm)

背部腿部联动或独立升降

适用床垫尺寸: W970×L1950mm

家居风电动床EZEL系列

Ezel

任何人都能轻易操作的电动护理床
Electric adjustable bed that anyone can easily operate



床垫宽幅:
970mm



原木色

所有操作均可通过
遥控器完成
All operations can be done by remote control



安心·安全的床架
背部·腿部床架采用安全的设计。马达
防尘、防水性强。床架强度符合
JIS/T9254家用电动护理床的设计要求



配备两只专用护栏
配有两只专用护栏，用于防止从床上跌落。紧凑型的设计不会妨碍上下床。
护栏可按需装在头侧或脚侧



床架高度2段可调节
根据使用者的使用安全和舒适度，装
配时选择易于离床站立的高度

一马达、四段分的床板设计；背腿联动的功能，是为了防止身体向下滑移。当背部抬起到一定角度时，腿部会自动放平。

A motor and four segments of bedplate design; back leg linkage function is to prevent the body from sliding down. When the back is raised to a certain angle, the legs will be leveled automatically.



功能

背部升降: 0~73° · 脚部升降: 0~18° (背部腿部联动)

尺寸: W970xL2026xH800mm

(床板高度: 260mm,335mm)

适用床垫尺寸: W970×L1950mm

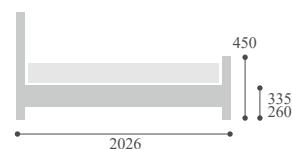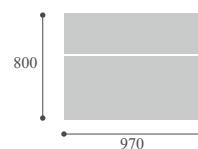

单位: mm

床垫(高级家居床适配弹簧床垫)

FranceBed 制日本进口商品



Spring mattress



减腹压滑动弹簧床垫 RH-FK-DLX

减腹压滑动弹簧床垫在电动床上升过程中，背部床垫的上下层会自动滑移，调整坐姿，减轻腹部压迫感，营造舒适坐姿。

In the process of the rise of the electric bed, the upper and lower layers of the back part will slip automatically, adjust the sitting position, reduce the pressure of the abdomen, and create a comfortable sitting position.



采用了既柔软又具韧性的双层高密度连续弹簧，体现了电动床床垫迄今为止所未达到的卓越的体压分散性能，并兼顾舒适度和耐久性。

尺寸：W970/1220×L1950×H250mm

材质：表面 提花面料

填充物 普通海绵

弹簧：高密度连续弹簧

特点：防螨·抗菌防臭加工

两面使用

可弯折弹簧床垫 RX-THF



尺寸：W970/1220×L1950×H190mm

特点：可弯折

材质：表面 100% 聚酯纤维


防螨·抗菌防臭加工

填充物 慢回弹海绵

两面使用

弹簧：高密度连续弹簧

无痕折叠弹簧床垫 MS-06-970

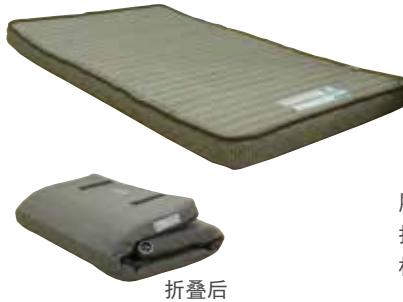

特点：可3段折叠，方便收纳

超强透气性和耐用性

防螨·抗菌防臭加工

两面使用

展开尺寸：W970×L1950×H120mm

折叠尺寸：W970×L630×H370mm

材质：表面 100% 聚酯纤维

填充物 慢回弹海绵

弹簧：高密度连续弹簧

EXCELLENT LT-700N AS Hard Medium Soft LT-700N TH AS 慢回弹

高级家居床适配连续弹簧床垫 Advanced home bed adaptable spring mattress

影响睡眠质量的，是入睡前的30分钟。无论酷暑还是严寒，为了您的舒适睡眠，我们开发了带有缓和床垫温度变化功能的[Nano T.Thermo]。面料表面织入的特殊纤维，使得床垫表面夏季温度不易上升，冬季温度不易下降，因此能控制床垫的温度变化。

The quality of sleep is 30 minutes before falling asleep. Whether hot summer or cold, for your comfortable sleep, we developed a [Nano T.Thermo] with the function of easing the temperature change of mattress. Special fiber fabric on the surface makes the temperature of mattress surface not easy to rise, and the temperature in winter is not easy to fall, so that the temperature change of mattress can be controlled.



边缘支撑防止塌陷和变形
Edge support prevents collapse and deformation



高密度连续弹簧横截面
High density continuous spring cross section

Hard	Medium	Soft	慢回弹
羊毛 树脂棉 海绵 防虫无纺布 高密度海绵 棕垫 毛毡	羊毛 树脂棉 海绵 防虫无纺布 高密度海绵 毛毡 棕垫	羊毛 树脂棉 海绵 防虫无纺布 高密度海绵 毛毡 弹力网	树脂棉 记忆海绵 防虫无纺布 柔软海绵 海绵 毛毡 棕垫

展开尺寸：W850/970/1220/1400/1540/1710 × L1950×H270(TH:280)mm

材质：表面 有温度调节功能的双面针织式样

填充物 慢回弹海绵

弹簧：高密度连续弹簧

绗缝层：大型绗缝图样

仕样：边缘支撑仕样

特点：防螨·抗菌防臭加工·通气孔加工·两面使用

炎热的季节
温度不易上升COOL 面



寒冷的季节
温度不易下降WARM 面



床垫
家居风
电动床

高级羽绒被

全身按摩器

床垫
护理理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护体系图
适老化改造图

公司介绍

高级羽绒被 High quality down quilt

床垫
家居风电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

适老化改造
体系图

公司介绍

JOORYU AS90 JU-Fuji (富士)

为了人生1/3的舒适时间

For the 1/3 comfortable time of your life,

我们深入研究

为了让您拥有高品质的睡眠

每一个步骤，每一脚针线，

我们都精益求精，致力于高级舒适羽绒被


we study hard for the high-quality sleep,
we all strive for excellence in the advanced comfort down quilt.

使用日本天然净化的软水

充分细致洗净羽绒

上乘品质，匠心过造

Use nature pure soft water
Clean the down fully and carefully
High quality, make carefully

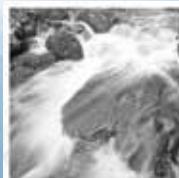

【羽绒被的制作流程】 Producing process of down quilt

以欧洲加拿大等为中心，从世界各地的羽绒产地进口，经过层层筛选后，得到优质羽绒原料

Take countries like Europe, Canada and other countries as the center, imported from all over the world, the quality of down material is obtained after screening

用除尘器去除杂质
Remove impurities with dust wiper

除尘
Dust remove

进行抑制细菌繁殖的制菌加工和防螨虫加工
Bacteriostatic and antimite processing to inhibit bacterial propagation.

抑菌
防螨加工
Antibacterial
antimite

纯手工细致缝合
并填充羽绒
Hand made sewing
and fill in down

缝制填充
Sew and
fill

检品
Inspect

原料进口
Import

原料测试
Test

在本公司的专业实验室内，进行混合率容积率等各种测试

In the company's professional laboratory, mix rate, floor area ratio and other tests are carried out.

洗净
Clean

洗净用水是
掛川·赤石山系小笠山的无污染的清澈地下水

Use clean and pure
underground water
which not be polluted

使用筛选机器，
根据严格的社内
标准选取优质羽绒

Select high-quality
down according strict
company standard by
selecting machine.

严格细致的品质检查不放过任何
一丝瑕疵。另外在日本洗净·日本生产的羽绒被上缝上JOORYU标签。

Any flaw is not allowed under strict quality
inspection. Besides, JOORYU label is sewed
on the duvet which is cleaned and produced
in Japan.

淡蓝
Blue粉红
Pink

采用来自匈牙利的白鹅绒
一年四季皆可使用。
The Hungarian white goose down can
be used all year round

FRANCEBED自主品牌JOORYU白鹅绒被的填充绒，采用来自匈牙利的白鹅绒，是用来自于法兰西羽绒工厂所在地的静冈县掛川市小笠山的天然地下水来清洗的。

FRANCEBED's self-owned brand JOORYU uses white goose down from Hungary and uses underground subsoil naturally filtered from Mt.Ogasa(Shizuoka, Japan) to wash down.

含绒量： 90%以上

羽绒蓬松量： 370 cm/g以上

水禽种类： 白鹅绒 White goose down

水禽产地： 匈牙利Hungary

尺寸： 单人W150 x L210cm(0.9kg+0.3kg)

双人W190 x L210cm(1.3kg+0.5kg)

加宽W220 x L210cm(1.5kg+0.6kg)



匈牙利产白鹅绒 Hungary white goose down
得益于中部欧洲大陆的气候，传统的
饲养方法，及职业取绒人的精湛技术，
取得了最高级的羽绒。



GF标志 GF logo
严格品质标准，“全日本寝具寝装品协会”
认证产品，只授给填充物样本、明确品质
标识等按照严格品质基准进行公示的商品。



抗过敏 Anti allergy
可吸附羽毛上的过敏根源物质（螨虫，花
粉等），有效阻止喷嚏等过敏反应。



春夏秋冬皆可用 Can be used all the seasons
春秋可使用一条厚的羽绒被，夏天使用
一条薄的羽绒被，冬天可以将2条被子扣
在一起使用，这样一年都能使用羽绒被。



JOORYU JOORYU Brand
只有满足JOORYU的羽绒才可以使用JOORYU铭牌。



10年超长品质保证 Ten years' long quality guarantee
法兰西床集团制造的羽绒被，品质保证，羽
绒可连续使用10年



抑菌加工 Bacteriostasis processing
抑菌工艺有效阻止纤维上的细菌繁殖，长时间
保持纤维产品的清洁卫生。



匈牙利白鹅绒 Hungary white goose down
全世界评价最高的是匈牙利产的羽毛，其中只
特别采用了大型的羽毛，可以给您提供高档的
舒适感

舒适枕ZT系列 Cosy pillow

FranceBed 制日本进口商品



至臻系列 舒适枕
New shoulder fit pillow



如何选择合适的枕头?

根据每个人的脊椎高度不同，应选择不同高度的枕头。通常情况下：枕头的适宜高度以10~15cm较为合适。脊椎高度为3.5~4.5cm时，适宜9cm左右的低枕头；脊椎高度为5.5~6.5cm时，适宜12cm左右的高枕头。通常，患有高血压、心脏病、哮喘的人需要睡高枕，患低血压、贫血的人需要睡低枕。

According to the demand for pillow height of different group, the five pillows provide both low and high style, which suits people whose cervical vertebra height is 3.5 ~ 4.5 and 5.5 ~ 6.5cm. The special material inside can support the head effeciently. The cover of pillow adopts unique anti-bacteria craft and matches with the head, neck and shoulder shape, which makes sleeping more comfortable.

颜色：白色 white

尺寸：390×520mm

(羽绒, 塑料管, 弹簧纤维, 荞麦)

310×500mm

(慢回弹记忆海绵)

重量：1164g



弹簧纤维 ZT-01
Spring fiber
松软的手感，
内部充满空气，
质地轻盈，
让您感受包围的满足感。



慢回弹记忆海绵 ZT-02
Buckwheat
高品质记忆棉，
有效记忆您的头型，
支撑颈部，舒适睡眠。



羽绒 ZT-03
Slow-rebound foam
精选羽绒填充，
防菌防螨枕套，
保暖透气，
给您柔软的触感。



塑料管 ZT-04
Plastic tube
小塑料管填充，
有效保证空气流通，
特殊触感，香甜入睡。



荞麦 ZT-05
Down
荞麦壳填充，软硬适中，
高透气性，抗菌防螨，
健康生活。

靠枕 FL 系列 Multifunctional back cushion

FLEUR

甜甜圈 Donut

可随意平放，旋扭，折叠，按您喜欢的形式，放松心情

Placing flatwise, knobbing, folding, relax yourself according to your choice.



平放甜甜圈
Place flatwise



放地上防灰尘
Prevent dust



放椅子上当坐垫
Seat cushion

枕 套: 100%聚酯纤维 polyester
枕芯套: 92%聚酯纤维 polyester
8%聚氨酯纤维

枕 芯: 100%聚酯纤维 polyester
(碎棉状)

尺 寸: D550×H420mm



对折甜甜圈
Fold the donut



放脖子后当枕头
Pillow



放手臂上当垫子
Cusion on arm



放椅背上当靠垫
back cusion



紫色
FL-PU

橙色
FL-OR

绿色
FL-GR

粉色
FL-PI

蓝色
FL-BL



旋扭甜甜圈
Knob the donut



放腰部当支撑
Waist support



放包里易携带
Easy to take



放臀部易跪坐
Easy to kneel



放脚踝防受伤
Protect ankle



折叠甜甜圈
Fold the donut



放头部方便仰躺
Support the head



放胸部方便俯卧
Lie prostrate

侧卧枕 SV 系列 Sleep vantage



有效支撑头·颈·肩·背部，保持正确睡姿，减轻打鼾。

Support head, neck, shoulder and back, ensure right sleep posture and ease snore.



Sleep vantage



蜜桃粉 SV-P
Pink



冰海蓝 SV-B
Blue



抹茶绿 SV-G
Green

Sleep vantage Premium



柠檬黄 SV-Y
Yellow



深海蓝 SV-DB
Blue



西瓜红 SV-R
Red

规格 Specification

枕 套: 100%聚酯纤维polyester

枕 芯: 100%聚酯纤维(碎棉状) polyurethane fiber

尺 寸: W420×L390/550×H135mm

规格 Specification

枕 套: 银狐绒, 94%聚酯纤维polyester, 6%氨纶

枕 芯: 100%聚酯纤维(珍珠棉) polyurethane fiber

尺 寸: W420×L390/550×H135mm

Dr. Sleep vantage

由打鼾治疗专家设计诞生的侧卧枕。The pillow is designed by the snoring therapist.

相比较一般的侧卧枕，此款侧卧枕具有超强消臭功能，
强力消臭的商标已缝入枕套，消臭功能在洗涤后仍然有效。

Compared with the general lateral pillow, this lateral pillow has the function of super strong deodorization. The strong and deodorant trademark has been sewn into the pillowcase. The deodorizing function is still effective after washing.



札幌东德州会医院
打鼾呼吸医生



玫瑰红 SVD-R
Red



湖水蓝 SVD-B
Blue

规格 Specification

枕 套: 100%聚酯纤维polyester

枕 芯: 100%聚酯纤维(碎棉状) polyurethane fiber

尺 寸: M (LOW) W430×L390/650×H120mm

L (HIGH) W450×L390/650×H140mm

全身指压按摩器 Whole-body shiatsu massage machine

床垫
家居风电动床

枕头
高级羽绒被

全身
按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

适老化改造
照护体系图

公司介绍




Beauty
TO LIVE A COMFORTABLE LIFE.

- 加速恢复疲劳
• 促进血液疲劳
• 缓解肌肉疲劳
• Accelarate fatigue recovery
• Promote blood fatigue
• Relieve muscle fatigue
- 减轻肌肉僵硬
• 缓解神经痛和肌肉痛
• 促进胃肠消化
• Ease muscle rigidity
• Relieve Neuralgia and muscle pain
• Accelarate digestion

- **FranceBed** 对仰卧姿势进行了多年的研究
FranceBed study on the lying supine for years
- 从1980年开始到现在35年多，在日本、欧洲、
亚洲、美国等销售了120万台全身指压按摩器。
During over 35 years from 1980 to the present, Francebed has sold 1.2 milloon
massage machines in Japan, Europe, Asia and America and so on.

- **FranceBed** 是1946年成立的卧具和床垫生产厂家，公司总部位于东京。在睡眠和仰卧姿势领域，尤其是在肌肉舒缓以及心理舒缓和镇静方面具有大量的经验和专业技术。为了更放松、更愉悦的生活推出了独创的、令人兴奋的、崭新的全身按摩器系统，我们的经验为此系统提供了坚固的基础。
FranceBed is established in 1949 and manufactures beddings and mattress. The headquater locates in tokyo. We have plenty of experience and professional technology in the area of sleep and lying supine, especically in muscle soothing and psychological soothing and calm. For more relaxed and happy life, we promote the creative, exciting and brand-new whole-body massage machine system. Our experience provides the strong basis for the system.

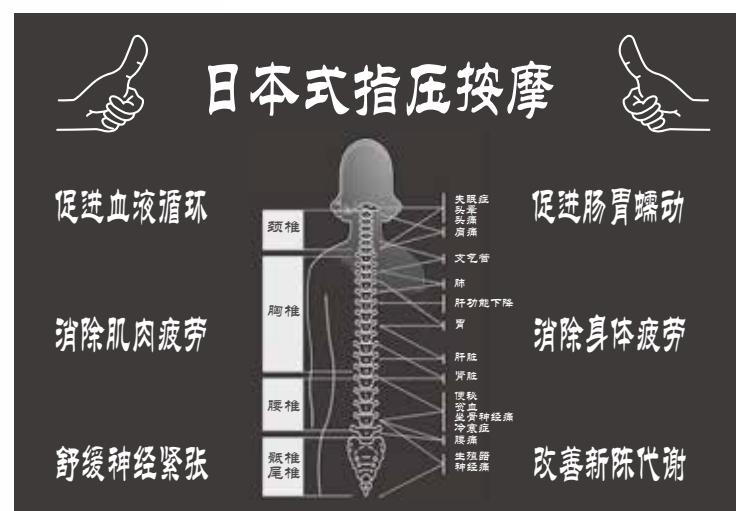

全身指压按摩器 Whole-body shiatsu massage machine

两组滚轮（用于上半身的头部滚轮和用于下半身的脚部滚轮）

柔和地按摩整个下半身，进行指压按摩。


Two sets of rollers (head roller for upper body and foot roller for lower part).

Massage the whole lower body gently and massage.



长距离指压按摩 Long-distance shiatsu massage

全身按摩组合使用位于指压点的革新性按摩滚轮，有助于缓解从脚踝至颈部的整个身体的肌肉僵硬，并促进血液循环。内置加热器还温暖身体，增强指压力。虽然本机是双折型，但其滚轮机制能确保在整个身体上的双向的连续行程，进行奢侈的、不中断的按摩，促进整个身体的血液循环，加速恢复肌肉疲劳。

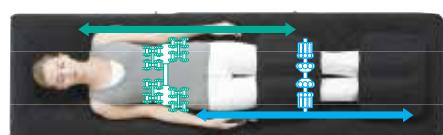

使用方法简易 Easy usage

能使用遥控器选择全身指压按摩器的程序，而无需起身操作。可从三个指压程序（上半身、下半身和全身）以及全身指压、重点指压和部分指压中选择。



安全设计 Safe design

使用15分钟后，全身指压按摩器自动停止，以防使用过度。

VS型
VS21 专用人造皮革外套
VS21 leather cover




专用床架需另购

自动按摩程序，振动按摩程序，加热器
Automatically massage process
Vibration and heat function

电源：220~240V、电流：0.6A
自动定时器：15分钟
重量：21kg
尺寸：展开 长2080×宽620×厚90
折叠 长1100×宽620×厚180
附件：垫子 1张 压袋 2个 (6kg×2)



上半身指压和伸背 Upper part shiatsu and stretch

头部滚轮能缓解脊椎周围肌肉的疼痛和僵硬。以仰卧姿势进行按摩，以便放松背部肌肉的紧张，使背部肌肉更易接受指压按摩。在指压按摩过程中，滚轮柔地提升上半身，以增强伸背效果。

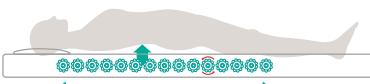


加热器疗法 Heat therapy

人们众所周知，暖和身体能改进血液循环，促进新陈代谢，从而增加按摩的效果。我们的全身指压按摩器带有内置加热板，能温和地将身体暖和至指压按摩的最佳温度，从而刺激新陈代谢，促进缓解肩部僵硬和其他肌肉紧张。这又对神经系统具有镇静和止痛效果，进一步增强按摩作用。

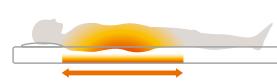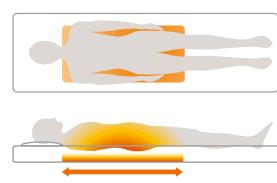

ST型

KEN-FB型

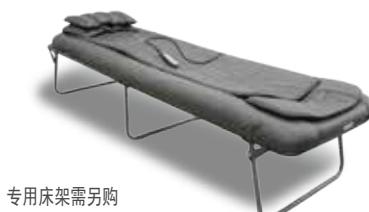

专用床架需另购

自动按摩程序
Automatically massage process

电源：220~240V、电流：0.5A
自动定时器：15分钟
重量：18kg
尺寸：展开 长2100×宽620×厚90
折叠 长1200×宽620×厚180
附件：垫子 1张 压袋 2个 (6kg×2)

下半身指压 Lower part shiatsu

腿部滚轮能对下半身的肌肉，特别是下背、大腿、小腿和脚踝发生作用。因为下半身不太利于按摩，所以将特殊设计的沙袋放在腿部的上面，以增强指压效果。



增强按摩效果 Strengthen massage effect
增加压力将带来更好按摩效果。40公斤以下的人一般只放一个压袋在膝盖上，而超过40公斤的人可使用两个压袋，一个放在膝盖上，另一个放在脚背上。

小巧紧凑，可携带 Compact

全身指压按摩器仅重18至22.5公斤。能折叠成一半以便何时何地都可携带。折叠时仅厚18厘米，便于保管。



专用床架需另购



专用床架需另购

自动按摩程序，加热器
Automatically massage process
Heat function

电源：220~240V、电流：0.6A
自动定时器：15分钟
重量：18kg
尺寸：展开 长2100×宽620×厚90
折叠 长1200×宽620×厚180
附件：垫子 1张 压袋 2个 (6kg×2)

电动护理床 · 床垫 · 附属品一览表

A list of electric nursing beds, mattresses and appendages

护理床 宽幅850/910 三马达/二马达 Nursing bed Wide 850/910 Three motor Two motor	ISS-NP31C-IV-WL1 17P	NS-NM32C-WH-WL1 19P	ESPOIR 18P	FBN-640 20P	FLB-03J (04) 20P
床垫 Mattress		22P 双面海绵床垫 MS-01 Double-sided sponge mattress MS-01	22P 减腹压滑动床垫 MS-03 Abdominal pressure sliding mattress MS-03		22P 防褥疮慢回弹床垫 MS-05 Bedsores slow rebound mattress MS-05
脚部 Foot		固定脚 Fixed foot 双轮脚轮 Double wheel casters 中控刹车脚轮 Brake shoe with medium control		专用固定脚/脚轮	FLB-04脚轮
头尾板 Head and tail plate	PC1 WL1 WB1 WL2 WB2			专用头尾板	
护栏 guardrail		24P SR-100JJ-IV/SR-100JJ-BR	24P SR-106JJ-IV(LO)/SR-106JJ-BR(DO)	24P SR-800JJ-IV	
	24P SR-300JJ-IV/SR-300JJ-BR	24P GR505N	24P GR510-IV(BR)		
	24P SRF-150	24P GR07C-IV(BR)			

分体式电动护理床 IS 系列

Split-type electric IS series

五段式床板 双轮脚轮 三马达 手摇兼用

高度调节

背部升降

腿部升降

背部腿部同时升降

ISS-NP31C-IV-WL1 米色木制头尾板，恬淡自然
Ivory wooden head and foot board



ISS-NP31C-IV-WB1

多功能遥控器

可以控制背部升降，脚部升降，背部脚部同时升降，床的高度升降。

插入式护栏

插入式的设计可根据需要放置床头，床中，床尾侧，床的四周都设有孔洞，合理的杠杆间距防止病人卡住，与床头板等高的高度有效防止使用者摔落下床。

床头床尾板

根据喜好，可选择米色，棕色或者ABS塑料床头床尾板。
插入式设计方便拆卸。

五段式床板

更加贴合人体曲线设计的新型五段式床板与头部·背部·臀部·大腿·小腿·的人体曲线自然吻合。流畅的曲线使身体零负担、倍感舒适。

简单拆卸

可将床体简单分割为床板、上床架、下床架三部分。



使用者自行操作按键，维持甚至提高生活自理能力，将床降至最低位，防止熟睡中的使用者不慎摔落受伤，护理时将床调高，护理更轻松。
Users can operate the buttons themselves and improve the ability of living on their own. Adjusting the bed to the lowest position to prevent users falling down and getting injury. Adjusting the bed to the higher position makes nursing easier.



ISS-NP31C-IV-WB1

棕色木制头尾板，整体和谐


三马达四功能3 motors five functions

背部升降：75°

脚部升降：29°

背部腿部同步升降

床的高低升降：H304~641mm

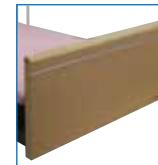

ISS-NP31C-IV-WL2

米色木制头尾板，恬淡自然



ISS-NP31C-IV-PC1

塑料头尾板，简洁大方

尺寸WL: W956×L2106mm

尺寸PC: W956×L2136mm

适用床垫尺寸:W850×L1950

Multifunctional remote control

Control the rising and falling of back, foot, both back and foot section and bed height.

Inserted side rail

Inserted design can be placed at the head side, in the middle or foot side. Both sides have the holes for side rail. And the distance prevents users getting stuck in. The equal size with the head board prevents users falling down.

Head and foot board

Ivory, brown and ABS plastic can be chosen according to your like. Inserted type is easy to disassemble.

Five-part bed board

Five-part bed board of new style matches with head, back, hip, thigh and shank well. The fluent curve make more comfortable.

Simple disassemble

Can be divided into bed board, upper frame and down frame.

适用配件

塑料保护套

位于床的两侧，用于保护床架

Suitable accessory

Plastic cover

protect bed frame

双轮脚轮

具有优越的行走性能

IS(S)-NP32

Double-wheel caster

Superior performance of moving



ISS-SP31C-IV 宽幅系列

ISS-NP21C-IV 二马达系列

ISS-SP21C-IV 二马达·宽幅系列

ISS-SP11C-IV 一马达系列

ISS-SP11C-IV 一马达·宽幅系列

即将上市

五段式床板

租赁适用



护理床系列

Nursing bed series

床垫
家居风
电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护
适老
体改
造图

公司介绍

FranceBed 制日本进口商品

适合租赁的商品




FBN-JJ-R20



单位: mm

摆放式样 Layout pattern

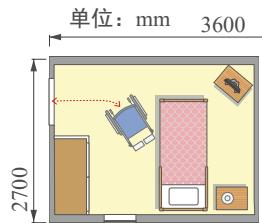

高度调节的功能 Function of height adjust

易于照顾的高度、易于坐的高度、易于站立的高度等，根据需求不同而调整。

Adjust the height as your need.
The height which is easy to nurse, easy to sit down and easy to stand up.

插入式护栏 Inserted side rail

插入式设计可根据需要放置床头、床中、床尾侧，床的四周都设有孔洞，合理的杠杆间距防止病人卡住，与床头板等高的高度有效防止使用者摔落下来。


无侧框架构造 No side structure

使轮椅更贴近床架方便移乘，更安全。

The wheel chair is more close to bed frame and more safe.



ESPOIR

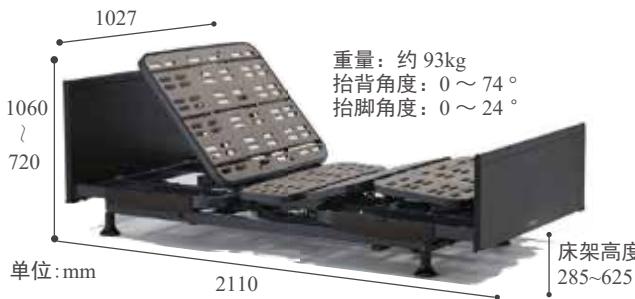

重量: 约 93kg
抬背角度: 0 ~ 74 °
抬脚角度: 0 ~ 24 °

单位:mm 床架高度 285~625

床的特点 The characteristics of the bed

可调节高度的低床设计

床板最高625mm

床板最低285mm

身材小的人也能安心的坐着

方便介护高度

框架结构

去除床中央侧面框架显得很清爽

脚在前方站起比较轻松，也减轻跌倒的危险性

左右两侧使用轨道和移动栏，支持独立行走

简单操作的遥控器

手握遥控器简单易操作

适用任何人群

舒适的床板

升降、抬背、抬腿的3机能可分别调整

头、背、臀部、小腿自然摆放

透气性床板

Low bed design with adjustable height

The highest hight of is 625mm

The lowest hight of is 285mm

A small man can sit in peace

Easy to nurse

Frame structure

It looks refreshing to remove the central side frame of the bed

Stand up in front is easier and reduce the risk of falling down

Use track and mobile bar on both sides to support walking.

Remote control is simple and easy to operate.

Remote control for simple operation

Apply to any group of people

Comfortable bed plate

The 3 functions of lifting can be adjusted separately

Natural placement of head, back, hip and calf

Breathable bedplate



设计素雅大气
Elegant design



深藏青色的床架中黑色的
床板组合



3马达 Three motors
3马达是介护床的充实功能



抬背
抬脚
背腿联动
调节高度



宽幅更宽
Much wider
91CM比标准宽6CM



床垫的宽度
Width of mattress
91 CM

床架可以分解为8部分，在高层住宅或者狭窄的空间也没关系。
The frame can be divided into 8 parts, which doesn't matter in high-rise buildings or narrow spaces.



电动护理床 NS 系列

五段式床板

独立刹车

双轮脚轮

三马达

手摇兼用

Electric adjustable bed NS series

高度调节

背部升降

腿部升降

背部腿部同时升降

图示





停电等不能使用遥控器时，可用手摇操作各项功能。

When remote control can not be operated in case of power failure, all functions can be operated by hand.



五段式床板 Five stage bedplate

更加贴合人体曲线设计的新型五段式床板与头部·背部·臀部·大腿·小腿的人体曲线自然吻合。流畅的曲线使身体零负担、倍感舒适
The new five section bed board, which is more suitable for human body curve design, naturally agrees with the human body curve of head, back, buttock, thigh and calf. The smooth curve makes the body feel free and comfortable

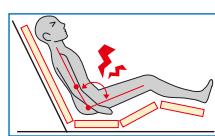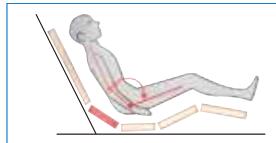

五段式床板 Five stage bedplate

四段式床板 Four stage bedplate

头尾板的易握孔设计 The easy grip design of the head and tail plate

头尾板两侧有易握孔的设计，方便拆卸、安装。离床步行时，床头板、床尾板也会不经意间成为了使用者的助行辅具之一
Both sides of the head and tail plate have easy grip design, which is convenient for dismantling and installation. When walking out of bed, the headboard and the tailboard will also become one of the user's help devices.




安全性、操作性兼顾的遥控器

A remote control with both safety and operability

操作手感俱佳的按键 A button with a good handle

- 操作时，按键灯会亮起 When operating, the button lights up
- 简单易懂的图示标记 Simple illustrations

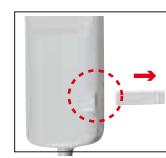

安全钥匙，防止误操作
Safety key to prevent misoperation

行走性能优越的双轮脚轮 Two wheel casters with superior walking performance

在使用时，毛发等杂物不易卷入更能轻松跨越电梯等的高低段差。

When used, hair and other debris are not easy to get involved, and can easily cross the elevator's high and low segment difference.

中控刹车 Middle control brake (NM33) 独立刹车 Independent brake (NM32)



更方便，更快捷。轻轻一踩即可固定护理床

It's more convenient and faster. A gentle step can be fixed Nursing bed

头尾板可选




NS-NM33C-WH-WL1



NS-NM33C-WH-WL1 中控刹车车

NS-NM32C-WH-WL1 4 轮独立刹车

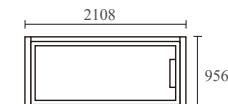

三马达四功能

背部升降：0~72°

脚部升降：0~23°

背部腿部同步升降

床的高低升降：263~623mm

NS-NM32C-WH-PC1

头尾板可选



NS-NM33C-WH-PC1 中控刹车车

NS-NM32C-WH-PC1 4 轮独立刹车



三马达四功能

背部升降：0~72°

脚部升降：0~23°

背部腿部同步升降

床的高低升降：263~623mm

家居风电动床

高级羽绒被

全身按摩器

电动护理床

护理床上用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护体系图
适老化改造



公司介绍

高性能产品

High performance products

超低位床电动护理床 FLB系列 Floor nursing bed FLB series

床架离地最低只有11cm，将坠床风险降到最低。对床的高度有不安的人也可放心。万一摔落时也会缓和冲击。
The lowest bedstead is 11cm, which will minimize the risk of falling bed. People who are uneasy about the height of the bed can be relieved. In case it falls, it will ease the impact.

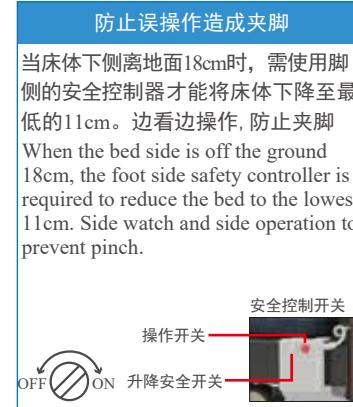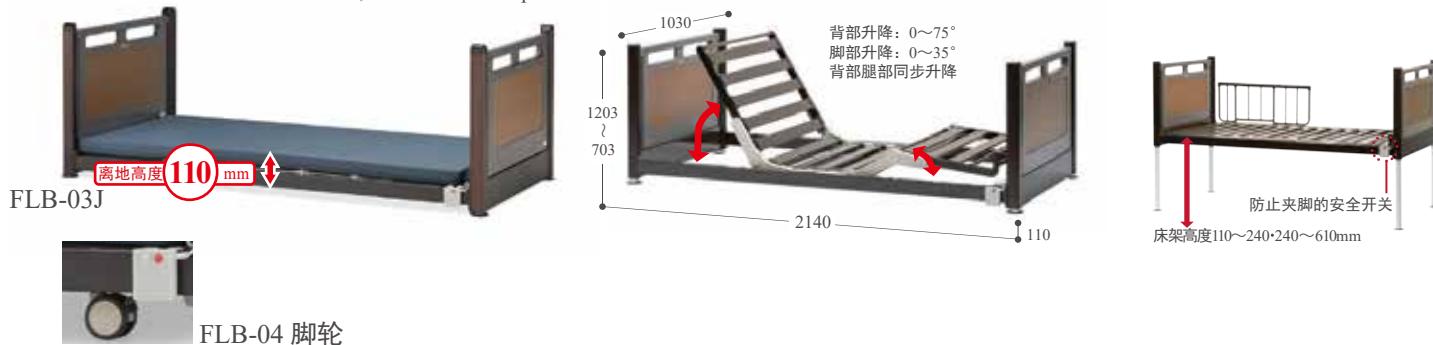

自动翻身床 FBN-640 Powered turning bed FBN-640

自动翻身的功能，可有效防止褥疮的产生，减轻照护人员的负担。同时，为了发生误吞、误咽的情况，也可在床板抬起时翻身。
The function of automatic turnover can effectively prevent the occurrence of bedsore and lighten the burden of caregivers. At the same time it can also turn over when the bed board is lifted for the purpose of swallowing .
单位: mm



自动运行功能 Automatic running function
自动模式可24小时自动进行体位转换，减轻照护人员的负担(角度、速度可根据需求调整)即使在夜晚使用也不妨碍睡眠。
The automatic mode can automatically perform posture conversion in 24 hours to reduce the burden on the care staff (angle and speed can be root).it does not interfere with sleep even at night.



左右翻身的功能 The function of turning around

用电动开关操作，床板会左右慢慢倾斜，调整使用者的体位，分散体压预防褥疮的产生。即使在夜晚使用也不妨碍睡眠。
With electric switch operation, the bedside will slowly tilt, Adjust the user's position prevent bedsore. It doesn't interfere with sleep even at night.



向左翻身



向右翻身

设定控制器 Setting controller



通过液晶控制器，可以简单地设置角度、速度、时间等各种各样的设定。
Through LCD controller, you can simply set various settings such as recovery angle speed, time and so on.



夜光功能在夜间操作也很安心。安全性操作性兼顾的遥控器。有防止误操作的功能
Nocturnal function is also easy to operate at night. A remote control with a safe and operational balance. Prevent misoperation function



高度调节

背部升降

腿部升降

背部腿部同时升降



低床电动体位转换器 PLP系列

Low bed electric position converter PLP series

一马达

直脚

背部升降

PLP
Special

PLP-NP11C 固定脚型

选择固定脚安装，可以单独作为床使用。 The installation of fixed foot can be used alone as a bed.

高度可以选择335或385mm。

Height can be selected 335 or 385mm.



功能

背部升降: 0~75°

尺寸: W900xL2015xH500(550)mm

(床板高度: 335(385)mm)

适用床垫尺寸: W850×L1950mm



PLP的旁边放置床垫，照护者可以一起休息。

A mattress is placed next to PLP, and caregivers can rest together.

辅助翻身床垫 TH-01 Auxiliary turning mattress TH-01

FranceBed 制日本进口商品



床垫不仅可以“翻身”，新型材料更能缓和疼痛 Mattress can not only "turn over", new materials can ease pain.



●可以在床上使用 Can be used in bed

使用通气性、减压性能出色的新型材料立体弹簧构造
Three dimensional spring structure with excellent ventilation and decompression performance使用遥控器操作简单
Simple operation with remote control

体位变换模式

时间设定: 30min~120min (5min/间隔)

角度设定: 8° 15° 20°

自动体位变换设定: 左↔上↔右、左↔上、上↔右


体位保持设定: 左上、水平、右上

自动变换及保持已设定的体位




良好的体压分散性 Good bulk pressure dispersion


仰卧位 Supine position

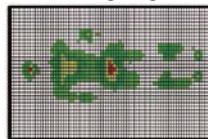

左翻身位 Left turning position

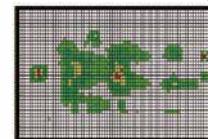自动变换体位，防止体压集中在一个地方。
Automatically change position to prevent body pressure from concentrating in one place.

电动调节床垫 Looper Move RP-01

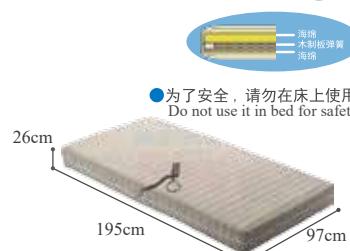Electric adjustable mattress
RP-01

通过遥控操作，即可从睡姿调整为坐姿马达控制背部升降，腿部升降，背部腿部同时升降

By remote control, it can be adjusted from sleeping position to sitting posture motor to control back lifting, leg lifting and back legs lifting simultaneously.

材质: 面料聚酯纤维 (PET) 100%

填充物 海绵 (Sponge) 木制板弹簧

尺寸: W970×L1950×H260mm

重量: 约 30Kg

背部升降 0 ~ 65°

腿部升降 0 ~ 25°

背部腿部同步升降

防褥疮气垫床垫 Bedsore cushion mattress

※制造公司: 上海三和医疗器械有限公司

由20根独立管状气垫组成，每两组交替充气，随时变换使用者的体压部位气垫表面的喷气孔可以降低被褥中潮气和浊气，对褥疮的预防和辅助治疗起到良好的效果。减轻长期卧床的痛苦，同时减轻护理人员的负担

It consists of 20 independent tubular air cushions, each two groups alternately inflated, changing the body pressure parts of the user at any time. Air holes on the air cushion surface can reduce moisture and turbid air in bedding, which is good for bedsore treatment. Alleviated the pain of long-term bedridden care while reducing the burden of nursing staff.



主材: 聚氯乙烯(PVC) 聚氨酯(PUR)

尺寸: W820×L1900×H150mm

护理床专用床垫 Special mattress for nursing bed

床垫
家居风电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品


清洗消毒设备

租赁服务

照护
适老化改造

公司介绍

防褥疮慢回弹床垫 MS-05 Anti-bedsores slow rebound mattress

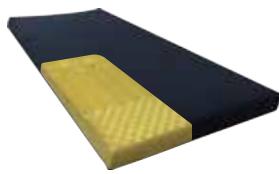

横截面解剖图 Cross sectional anatomy

Cross sectional anatomy

慢回弹海绵 (保证空气有效流通)
Slow springback sponge (ensuring effective air circulation)

聚氨酯爆破绵 (有效分散突出部位压力)
Polyurethane burst cotton (effective dispersing pressure)

普通海绵 (维持床垫良好状态)
Ordinary sponges (maintaining a good mattress)

此款床垫利用不同形状的慢回弹海绵，保证空气有效流通，防止褥疮生成。同时不同形状的慢回弹海绵，针对身体的突出部位（肩部、臀部、足部），对于长期卧床的人来说可以有效分散突出部位的压力，减轻卧床负担。

This mattress uses different shapes of slow springback sponge to ensure effective air circulation and prevent bedsores formation. At the same time, the slow springback sponge with different shapes, for the prominent parts of the body (shoulder, hip, foot), for people in bed for a long time can effectively disperse the pressure of the prominent position and reduce the burden of bed.


主材：面料 聚酯纤维 100% polyester

填充物 慢回弹海绵

Polyurethane burst cotton

普通海绵

尺寸：W850×L1950×H100mm

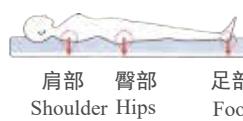

慢回弹减腹压滑动床垫 MS-03 Slow rebound sliding mattress



横截面解剖图 Cross sectional anatomy

聚氨酯爆破绵 (保证空气有效流通)
Slow springback sponge (ensuring effective air circulation)


普通海绵 (维持床垫良好状态)
Ordinary sponges (maintaining a good mattress)

主材：面料 聚酯纤维 100%

填充物 聚氨酯泡绵

Polyurethane foam

尺寸：W850×L1950×H95mm

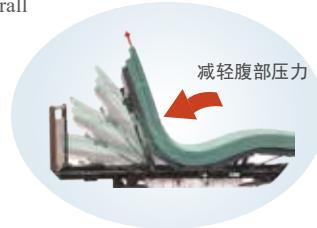

双面海绵床垫 MS-01 Double side sponge mattress



横截面解剖图 Cross sectional anatomy

聚氨酯泡绵 (海绵密度 25kgf/m³)
Polyurethane foam (sponge density 25kgf/m³)

聚氨酯泡绵 (海绵密度 35kgf/m³)
Polyurethane foam (sponge density 35kgf/m³)

防水外套 Waterproof coat

耐水加工 防水加工

洗涤 可机洗 / 不可脱水 / 干燥机可用 (100°C)

主材：面料 聚酯纤维 100%polyester
填充物 聚氨酯泡绵

尺寸：W850×L1950×H80mm

慢回弹床垫 MS-02 Slow rebound mattress



贴合床板弯曲

横截面解剖图 Cross sectional anatomy

慢回弹海绵 (保证空气有效流通)
Slow springback sponge (ensuring effective air circulation)

聚氨酯泡绵
Polyurethane foam

普通海绵 (维持床垫良好状态)
Ordinary sponges (maintaining a good mattress)

15cm的床垫厚度影响了弯曲效果，为了解决此问题，此款床垫通过特殊的切割工艺，使床垫可以贴合床板的弯曲曲线同步到位

The thickness of the mattress of the 15cm affects the bending effect. In order to solve this problem, the mattress can be fitted with the bedding bending curve in place through a special cutting process.


主材：面料 聚酯纤维 100%填充物

聚氨酯慢回弹海绵 Polyurethane slow rebound sponge

尺寸：W1220/970×L1950×H150mm

主材：面料：聚酯纤维 100% 填充物：聚氨酯慢回弹海绵

特点：15cm 厚度的床垫可以贴合床板的弯曲，曲线同步到位。

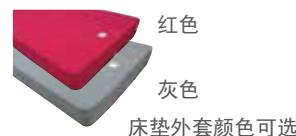

多功能纤维床垫 SM-85C Multifunctional fiber mattress



阻燃性

- (1) 日本铁道车辆机械协会 铁道车辆燃烧试验 合格
- (2) 日本防炎协会 窒具类认定标准45° 合格
- (3) 汽车用FMVSS302法 难燃标准 合格
- (4) BS7177:2008 中度阻燃性检测 (香港标准及检定中心检测) 合格

FranceBed 制日本进口商品



外包面料

经过抑菌、阻燃加工，具有卓越的抗菌、阻燃效果。
Through antibacterial and flame retardant processing, it has excellent antibacterial and flame retardant effects.

人性化拉链设计


190cm长的拉链设计，床垫外罩轻松拆取。
190cm long zipper design, easy to remove the mattress cover.

抑菌

外包面料抑菌加工处理，抑制杂菌繁殖，防止异味的产生。
Outsourcing fabric antibacterial processing, inhibition of hybrid breeding, to prevent odor generation.

横向波形切割工艺

横向波形切割工艺，更加贴合人体曲线，使身体零负担，倍感舒适。
The transverse wave cutting technology is more suitable for the human body curve, so that the body can bear no burden and feel comfortable.

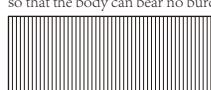

主材：面料 聚酯纤维 100%

(抑菌·阻燃加工)

填充物 聚酯纤维 100%


(抗菌防臭·阻燃加工)

尺寸：W850×L1950×H80mm

多功能聚酯缓冲材料

使用经过抗菌加工的特殊纤维，兼顾柔软舒适性与使用耐久性。
The use of special fibers that are processed by bacteria can give consideration to soft comfort and durability.

高档纤维床垫 FM-85C High grade fiber mattress

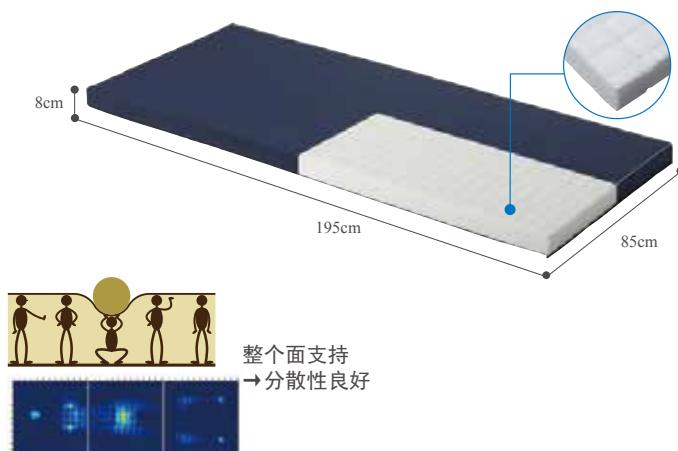


整个面支持
→分散性良好



剖面图

3D弹性纤维床垫 3D elastic fiber mattress

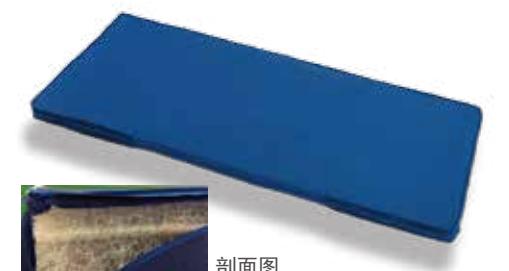

3mm 厚度

5mm 厚度

8mm 厚度



备注：床垫的厚度密度可以订制，床垫内材可根据需求配置。
有起订要求。

Remarks: the thickness of the mattress can be customized, and the material inside the mattress can be configured according to the requirements. There is a demand for MOQ

TEIJIN

帝人集团

帝人制日本进口商品



使用特殊粘结纤维与特殊加工技术共通创造出的产品

- ① 使用『特殊弹性高分子纤维』elk 使床垫有更好的回弹性·更持久的寿命·可以耐高温消毒清洗
- ② 使用其他公司没有的特殊成型加工技术(内部纤维粘结均匀性好)尺寸安定性好·更持久的寿命密度调配(根据使用位置的不同可以调整不同的硬度)

- ① 不容易塌陷因此更容易保持良好的睡姿。
- ② 在构造上加强床垫腰部的硬度,让病人更容易在床边坐着休息

(床的两面硬度都有加强)

可以消毒或是与一般的床单被套一起清洗因此清洁性好

- ① 因为床垫是100%涤纶纤维组成,所以使用氯或是臭氧消毒时比较不担心有变色或是对于质量有影响
- ② 因为使用了帝人公司高弹性且高融点(155°C)的特殊纤维『elk』,因此床垫可以在高温下进行清洗保暖不容易闷热

因为床垫有特殊构造因此透气性好,夏天不容易闷热,冬天保暖性好。

Products created by using special bonding fibers and special processing techniques Density deployment (depending on the location of the position can be adjusted to different hardness).

It can be sterilized or cleaned with ordinary bedsheets, so it has good cleanliness. Keeping warm is not easy to muggy

NACA HEALTH

昆山纳甲智能科技有限公司

规格： 3CM~18CM厚度 一次塑形；

芯材密度 (105KG/m³; 90KG/m³; 75KG/m³; 66KG/m³; 84KG/m³)

产品材质: POE聚合物弹性纤维

床套材质: 可选网眼布 (吸汗透气)

产品尺寸: 90cm×200cm×(3~18cm)

原产地: 中国

产品颜色: 内芯白色、床套蓝色、银色、军绿

产品特点: 1. 绝佳的透气性, 热气湿气从纤维间隙散发, 保持干爽, 不积热

2. 内芯可阻燃, 全方位冲洗, 速干性能好; 床套可机洗

3. 透气性好抑制螨虫的滋生, 控制湿度, 改善闷热, 防止压疮的发生

4. 上层纤维层弹性好, 中层起到分散体压的作用, 底层具有极高的耐压性
可双面使用

Specifications: 3CM~18CM thickness for one time;

core density (105KG/m; 90KG/m; 75KG/m; 66KG/m; 84KG/m)

Product material: POE polymer elastic fiber

Bed material: optional mesh cloth (breathable and breathable)

Product size: 90CM X 200cmX (3~18cm)

Origin: China

Product color: inner core white, bed blue, silver, army green.

Product features:

1. Excellent air permeability, heat moisture and moisture release from fiber gaps, keep dry and keep warm.
2. The inner core is flame-retardant, washable in all directions, fast drying performance, machine washable.
3. good air permeability to control the breeding of mites, control humidity, improve muggy and prevent pressure ulcers.
4. The upper fiber layer has good elasticity, the middle layer plays the role of dispersion pressure, and the bottom layer has extremely high pressure resistance, which can be used on both sides.

护理床专用护栏 SR 系列 Side rail SR series

床垫
家居
风电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护老体系改造

公司介绍

插入式的设计，可根据需要放置床头、床中、床尾侧。

床的四周都设有孔洞，合理的间距防止病人卡住，与床头等高的高度有效防止使用者摔落下床。

The insertion design can be placed on the head of the bed, in the bed and on the side of the bed.

There are holes around the bed. Reasonable space can prevent patients from getting stuck. And the height keeping up with the height of the head can prevent users from falling off the bed.

SR100JJ-IV/BR 插入式护栏



2色可选：IV 乳白色 BR 棕色

包 装：2个/箱

产品主材：钢铁

表面处理：环氧粉体烤漆

尺 寸：L960×H460mm

IV Ivory BR Brown

2pcs/Box

Steel

Epoxy powder paint

SR106JJ-IV LO/BR DO 插入式护栏(带塑料顶盖)



2色可选：IV LO 乳白色 BR DO 棕色

包 装：2个/箱

产品主材：钢铁

表面处理：环氧粉体烤漆

尺 寸：L960×H460mm

IV LO Ivory BR DO Brown

2pcs/Box

Steel

Epoxy powder paint

SR800JJ-IV 插入式护栏



颜色：IV 乳白色

包 装：2个/箱

产品主材：钢铁

表面处理：环氧粉体烤漆

尺 寸：L1160×H460mm

IV Ivory

2pcs/Box

Steel

Epoxy powder paint

SR300JJ-IV/BR 插入式护栏



颜色：IV 乳白色 BR 棕色

包 装：2个/箱

产品主材：钢铁

表面处理：环氧粉体烤漆

尺 寸：L760×H460mm

IV LO Ivory BR DO Brown

2pcs/Box

Steel

Epoxy powder paint

护栏固定带 Side rail fixing belt



可有效固定护栏，防止意外发生。魔术贴的设计简单方便。

It can effectively fix the side rail to prevent accidents. The magic sticker design is simple and convenient.

SRF-150折叠护栏



颜色：灰色 Grey

包 装：2个/箱 2pcs / Box

产品主材：铝合金，钢铁 Alufe&Steel

尺 寸：L1530×H350mm

螺丝固定 Screw fix

助力扶手 GR 系列 Assisting handrail GR series

使用者从床边站立时，能给予有效支撑，辅助使用者安全离床

When users are standing from the bedside, they can provide effective support and help users to get out of bed safely.

GR510-IV(BR)



FranceBed 制日本进口商品



重量：7kg

尺寸：L1170×H460mm

摆臂扶手有三档可以调节，和床架边缘成45°，90°和135°

The swing arm can have 3 adjustable armrest and the angle between handrail and bed are 45°, 90° and 135°

GR505N



重量：7kg

尺寸：L1175 x H460mm

FranceBed 制日本进口商品



摆臂扶手有三档可以调节，和床架边缘成60°，90°和120°

The swing arm can have 3-stage adjustable armrest and the angle between handrail and bed are 60°, 90° and 120°

棕色区域配置缓冲材料腿部力量柔弱的使用者可将双膝抵在摆臂下侧的棕色缓冲区，辅助使用者轻松站立。即使扶手摆臂不小心碰撞到腿部时，也可以缓和冲击力。

Brown area configures buffer material. Users whose leg strength is weak can put his knees against the brown buffer on the lower side of the swing arm. The user can easy to stand. Even if the swinging arm collide with the leg, it can also ease the impact.



黄色固定按钮防止使用者误操作导致受伤。
The yellow fixed button prevents users from mishandling and causes injury.

GR07C-IV(BR)



重量：4kg

尺寸：L965×H460mm

生活辅助用品 Nursing support appliance

可调节床边桌 ST-137C Adjustable side table ST-137C



安全的设计
safety design



床面上升时，一旦身体或床体接触到床边桌
桌板会自动上升，防止使用者受到伤害。
When the bed rises, once the body or bed touches
the side table, the table board will rise automatically
to prevent users from being hurt.

桌板采用优质三聚氰胺饰面板，牢固、耐磨、耐热。
The table board adopts high quality melamine decorative panel
which is firm,wearable and heat-resistant.

规格 Specifications

颜色：米色

桌板尺寸：W400×L900

桌板可调节高度：H660 ~ 980mm

脚轮的低位设计

The low design of the casters



脚轮的低位设计可以轻松伸入低床位
配置4只360°滑轮。
The low design caster can easily stretch into
the bed and equip with four 360° casters.

人性化的设计
Humanized design



四周突起包边设计，预防细小物品掉落
降杆由高品质气杆升降控制，简单实用。
The projecting edge around can prevent small objects
from falling.
The drop rod is controlled by a high quality air lever,
which is simple and practical.

自立支援桌 FB-60 Independent support table FB-60

可以坐在床边使用的桌子 A table that can be used on the side of the bed



折叠可收纳
Foldable to store



规格 Specifications

尺寸：W900×D570×H620 ~ 720mm

重量：15.3kg

材质：饰面板 Ornament panel 钢材 Steels

移乘板 SP3560 Transfer board SP3560



辅助坐姿状态时的移乘

方便使用者轻松的从床移动到轮椅或坐便器上。

护理人员只需轻轻一推，就能快速转移使用者。

注意事项：使用者体重不超过 160kg。

床和轮椅之间间距不超过 20cm。



H master care

MasterCare 制丹麦进口商品

Transfer of auxiliary sitting position

It is easy for users to move from bed to wheelchair or toilet conveniently.
The nursing staff can quickly transfer users only by gently pushing

Note: the user's weight is not more than 160kg.

The space between the bed and the wheelchair is not more than 20cm.

规格 Specifications

颜色：黑色 Black

尺寸：W350×L600mm

重量：880g

移乘腰带 SB3560 Transfer of the belt SB3560



辅助站立和步行时的介护

使用者体重不超过 90kg。



Support for standing and walking

The user does not weigh more than 90kg.

规格 Specifications

颜色：黑色 Black

腰围：72 ~ 120mm

生活辅助用品 Nursing support appliance

床垫
家居风
电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销销售

清洗消毒设备

租赁服务

照护体系统

公司介绍

滑移布 SF70118 Slip cloth

方便而操作简单的移位床单可顺利变换体位或挪动位置。

Convenient and simple sheet shift can smoothly change positions or move positions.



特制三层滑移布，移动更轻松。

方便护理人员轻松的帮助使用者做一些翻身，移动等床上动作。

需要注意此滑移布仅限用来人体变换位置使用，不能作为移乘板使用或给其他物体使用。

不要把滑移布放置在过道等人多的地方，防止滑倒受伤。

Special three layers of slip cloth, moving more easily.

It is easy for nurses to help users to do some movements such as body turning and mobile. It should be noted that this slip cloth is only used for transformation of body position, and can not be used as a transfer board or for other objects.

Do not place slip cloth in places such as passageway to prevent slipping and injury.



东丽制日本进口商品



规格 Specification

颜色：黄色 yellow

尺寸：W705×L1180mm

材质：聚酰胺 polyamide

滑移布 N7060 Slip cloth



尤尼吉可制日本进口商品



圆筒状的容易滑动的移位床单。

铺在使用者的身体下面使用。

移动或体位变换·挪动时非常方便。

采用结实并可洗涤的素材，方便又卫生。

可折叠成小块放入口袋中，携带方便可随时使用。

可轻松移动卧床病人。

操作简单方便，与床面的摩擦少，从而减轻患者和帮助者的负担。



A cylindrical sheet that slides easily.

It is used under the user's body.

It is very convenient to move or change position.

The material that is strong and washable is convenient and hygienic.

It can be folded into small pieces and put into pocket. Easy to carry and can be used at any time.

It is easy to move the patient in bed.

The operation is simple and convenient, and there is less friction with the bed, so as to reduce the burden of patients and helpers.

规格 Specification

颜色：蓝色 blue

尺寸：W750×H750mm

材质：尼龙 nylon

HS-1 保暖护腰 waist support



这款商品可以固定腰部，很有人气。实际使用的时候能真切感受到患部得到伸展跟固定。

This product can be fixed to the waist, very popular. When you are using it, you can feel the extension and fixation of the affected part.

HS-3 粘扣式保暖护膝 clasp type kneecap



这款产品是保护防护作用。

This product is to protect knees.

HS-2 骨盆保护带 pelvic protective band



这款商品适用于保护腰部以下臀部以上的骨盆

This product is suitable for protecting the pelvis which is above the buttocks and below the waist.

HS-4 保暖护膝（长款） kneecap (long type)



这款产品的用法基本和 HS-3 相同。但长度可以固定住整个膝盖，稳定性很高。

The function of this product is basically the same as HS-3. But the length can be fixed on the whole knee, and the stability is very high.

吸水速干床单 Quick-dry sheet

吸水速干床单 TS-1014 Quick-dry sheet



规格 Specification

成分: 90% 聚酯纤维polyester 10% 聚氨酯polyurethane

尺寸: W100cm×H140cm

重量: 230g

- | | |
|----------------------|---|
| ● 不可氯漂 Do not bleach | ● 禁止熨烫 No ironing |
| ● 禁止拧干 No wringing | ● 常温烘干 Drying at room temperature |
| ● 禁止暴晒 No insolation | ● 使用40°以下水温, 可机洗
Using water below 40 degrees,
machine washable |

迅速吸水并扩散, 床垫表面干爽。

可反复洗涤, 不变形。

聚氨酯防水层可有效防止渗漏。

质地轻薄, 使用舒适。

表面特殊处理, 触感柔软。



Absorb the water and spread immediately and surface keeps dry.

Washable and no deformation

The polyurethane waterproofer can prevent leakage effectively

Light material and comfortable quality

Special processing of surface and soft touch

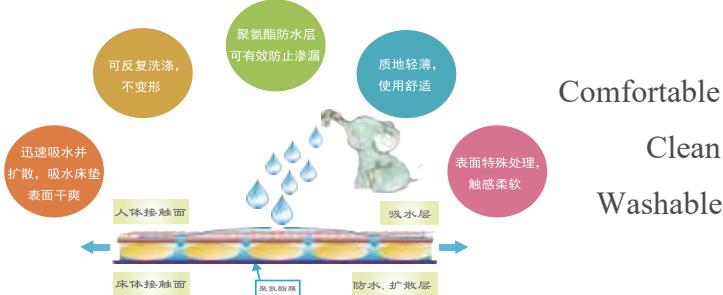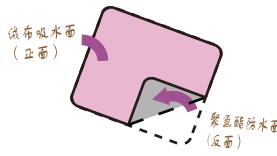

Comfortable

Clean
Washable

吸水速干床单 CS0211 / UF0218 / UF0169 Quick-dry sheet

UNITIKA
We Realize IT!


尤尼吉可制日本进口商品

使用日本尤尼吉可功能材料

吸汗发散材料与先进的制造编织技术相结合, 在干燥感、速干性能基础上赋予了卓越的高吸水扩散性

It adopts functional materials of Unitika in Japan

The combination of sweat absorbing and diffusing materials and advanced manufacturing and weaving technology gives excellent water absorption and diffusivity on the basis of dry and fast drying properties.

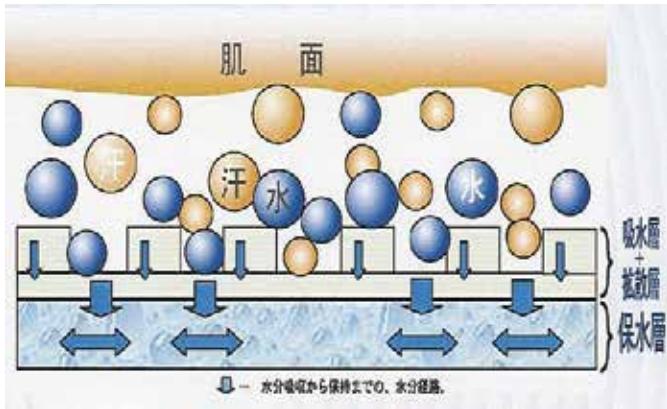

面料分3层: 由吸水层将人体表面水分吸收进来, 经扩散层将水分迅速扩散到积水层, 并将水分保留在吸水层之中, 在使用过程中不会产生粘着感。

The fabric is divided into 3 layers: absorbent layer absorbs moisture on the surface of the human body and diffuses quickly to water layer spreads through diffusion layer, keeps the moisture in water absorbing layer. The sense of adhesion is not produced during the use.



规格 Specification

成分: CS0211 表层涤纶polyester 60%, 棉cotton40% 背面PU涂层
UF0218、UF0169 表层涤纶polyester 100%, 棉cotton40% 背面PU涂层

尺寸: CS0211 W170xH90cm
UF0218、UF0169 W145xH90cm

特点

舒适素材

使用吸水扩散性材料、表面(接触皮肤的那一面)触感清爽可有效锁住水分
防止渗漏, 减轻粘着感可有效减轻湿热感。

防水性

背面的防水涂层可有效防止水分渗透进床垫。

洗衣机OK

可用40°C以下的温水进行洗涤。

烘干机OK

烘干机温度请设置在80°C以下使用。

Feature

Comfortable material

Using water absorbing material, surface (touching skin side) touching refreshing can effectively lock moisture and prevent leakage. Reducing sense of adhesion can effectively reduce damp and hot feeling.

Waterproofing

The waterproof coating on the back can effectively prevent water from penetrating into the mattress.

Washing machine OK

It can be washed with warm water below 40°C.

Dryer OK

The temperature of the dryer is set to be used below 80°C.

电动护理床 · 护栏注意事项 Precautions of bed and siderail

床垫
家居风电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护体系改造

公司介绍

电动护理床的选择要点 Key points for the selection of electric adjustable bed

背部升降 Back lift



背部升降功能辅助坐起
Back up auxiliary lifting function

腿部升降 Leg lift



腿部升降功能有效防止体位滑移
Leg lifting function effectively prevents slipping.

高低升降 High and low rise and fall



便于站立
Easy to stand



便于移乘
Ease to transfer



便于护理
Ease to care

电动护理床安全注意事项 Safety precautions of electric nursing bed



操作时请勿太紧靠护理床
Do not be too close to the nursing bed when operating



请保管好遥控器
Please keep the remote control well



背部上升时请保证仰卧状态
Please make sure your back is on the back when the back is up



请调整合适的高度
Please adjust to the right height



请勿跨越护栏及头尾板
Do not cross the siderail and head and foot board



请重视电源插头及电线·开关状态
Please pay attention to the power plug, wire and switch state



请勿放置危险物品
Do not place dangerous goods



请勿将身体任何部位伸入床架构造内
Do not put any part of the body into the frame structure

护栏安全注意事项 Precautions for safety of guardrails

请注意被护栏类物品夹到等的危险

由于被护理人员的身心状态及使用环境的不同，护栏等物品的间距间隙可能会夹到身体某个部位造成压迫，给身体带来伤害甚至危及生命。敬请足够重视
请注意不要发生以下或类似的被间距间隙夹住身体部位（特别是头部及颈部）。

Please pay attention to the danger of being caught in a fence class.

Because of the physical and mental state of the nursing staff and the different use environment, some part of the body may be clipped to the gap between the siderails and other items, causing harm to the body and even threaten your life. Please pay enough attention to it

Please be careful not to have the following or similar space to clip the body part (especially the head and neck).



注意间距
Pay attention to the gap



身体部位不要伸出
Do not stretch out the body part



不要依靠
Do not rely on




确认锁定
Confirm the lock



注意不要夹手
Do not get stucked



注意不要钩住衣物
Be careful not to hook the clothes

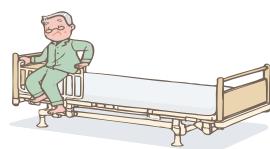


禁止坐立
Prohibit sitting




背部上升时要注意
Attention during the rise of the back



注意不要夹到手指
Be careful not to pinch the fingers

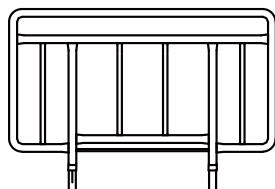

插入式护栏 Pluggable siderail
防止就寝时意外摔落 Prevent accidental fall in bedtime

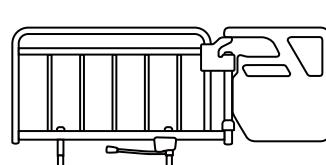

助力扶手 Assistive handrail
辅助被护理人站立 Assist the nursing person to stand

床垫选购要点 Key points for choosing mattress

舒适感 Comfort

想要保持舒适理想的睡眠姿势的人群推荐选购
适度让身体下沉的柔软床垫

We recommend people who want to keep comfortable and ideal sleeping posture to buy a soft mattress that allows the body to sink properly.



●有可能会漏尿的时候

It is possible to leak urine

如果容易失禁的话,请把防水床单挂在床单上
If you are prone to incontinence, please hang the waterproof sheets on the sheets.


●担心尿漏的时候

Worry about the leak in the urine

担心失禁的情况下,将防水床单铺在床单下面
If you worry about incontinence, lay the waterproof sheets under the sheets.

防水床单 Waterproof sheet

睡觉时有可能失禁或担心的人使用防水床单倍感舒适
Those who may be incontinence or worry about that during sleep may use waterproof sheets.

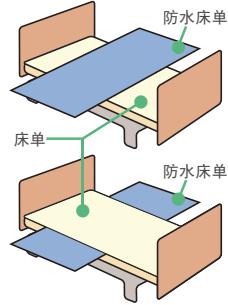

便于站立 Easy to stand

想要方便站立的人群推荐选购坐立时边缘不会塌陷下沉便于站立的硬床垫


We recommend people who want to stand conveniently to purchase a hard mattress whose edge will not collapse while sleeping.



预防褥疮 prevent bedsores

身体不能活动的人群,推荐选购有效分散体压的床垫
防止体压集中压迫在身体某一部位

People who can't move physically is recommended to choose the mattress with effective dispersion pressure to prevent body pressure from being concentrated in one part of the body.

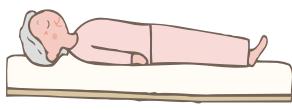

背部提升 Back lift

背部抬起时,床垫会上提能自动调整坐姿,减轻腹部压力
When the back is raised, the mattress will automatically adjust the sitting position and relieve the abdominal pressure.



尺寸 Size

请按照体型和使用的环境来选择

Please choose according to the using environment and shape.



请选择适合自己体型的护理床和床垫的尺寸。

Please choose the size of the bed&mattress suitable for your own body.






体压分散 Bulk pressure dispersion

体压分散性高的床垫 A mattress with high body pressure and high dispersion
体压适当地分散 Proper dispersion of body pressure

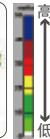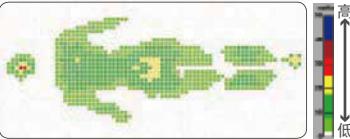

体压分散性低的床垫 A mattress with low body pressure and low dispersion
身体压力集中在局部 Body pressure is concentrated in a local area

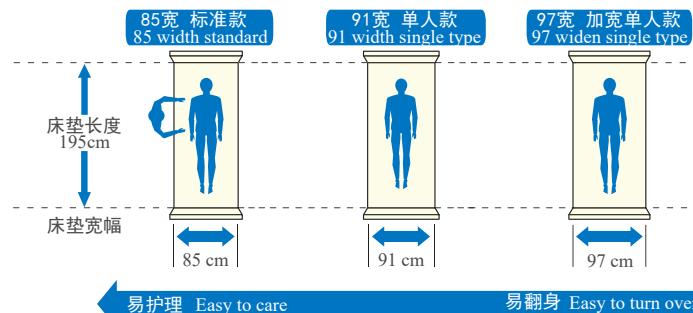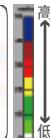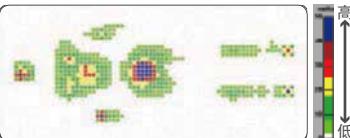

床垫
家居风电动床

高级羽绒被

全身按摩器

电动护理床

护理床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护
适老化改造

公司介绍

生活支援用品 Daily life support

安顾宜 ACTY

 日纸国际贸易(上海)有限公司

床垫
家居风
电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床垫
护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护
适老
化改造

公司介绍

安顾宜舒爽搭扣式




1 使用前，将纸尿裤打开，前后轻拉2~3次将立体护围充分的立起来，这样可使吸收面更广，防止侧漏。



2 纸尿裤平铺在床上，魔术腰贴的一段放置在背部，并以“尿液显示线”为中心，对准背部中心，将纸尿裤调整到腰部合适高度。



3 让使用者平躺并张开双腿，将纸尿裤从两腿间向上提拉，向上提拉时尽量收束变窄使纸尿裤吸收带紧贴尿道口。

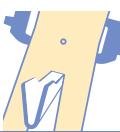


4 将有数字一端的粘贴区域提上来，放在腹部处展开，魔术腰贴贴在数字1~3之间。下方魔术腰贴喷需向上微斜粘贴。



适用型号范围	S	M	L
适用对象	臀围57-87cm(成人)	臀围70-110cm(成人)	臀围85-125cm(成人)
包装数量	10片	10片	10片
适用人群	长期卧床不起的中重度失禁者		

可弯曲粗柄勺/叉 Bendable shank spoon / fork

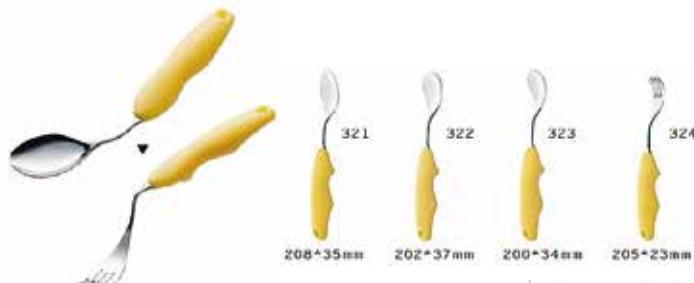

产品型号：321-324 (321-323勺, 324叉)
产品材质：18-8不锈钢 聚丙烯，耐热130度。
原产地：日本

产品特色：

- ① 前柄可自由变化角度，可适合各种手部姿态
 - ② 质量轻、耐热（握把耐冲击，里侧凹槽易抓握、防滑）
 - ③ 前端细小，易入口（3种勺型）
 - ④ 叉头向上弯曲（为了让食物不掉落，准确运入口中）
- Product features:
- ① The front handle can be changed freely, and it can be used for all kinds of hand posture.
 - ② Light weight and heat resistance (grip impact resistance, easy grip and skid proof insideside groove)
 - ③ The front end is small and easy to enter (3 kinds of spoon type)
 - ④ Bend the fork head upwards (in order to keep the food from falling and accurately enter the entrance).

使用注意：

- 1) 不能在微波炉和烤箱内使用
 - 2) 不要放入高于85°C的保温箱或消毒器中
 - 3) 不要接触漂白剂会导致掉色
 - 4) 手柄部分不能弯曲
- Use attention:
- 1) Can't be used in microwave ovens and oven
 - 2) Do not put in incubators or sterilizers above 85°
 - 3) Do not touch the bleach to cause the color drop
 - 4) The handle part cannot be bent

 昆山纳甲智能科技有限公司

日本进口商品

大把手汤碗 big handle soup bowl



产品型号：E0325
产品尺寸：φ105×H70mm
本体材质：PET
把手材质：ABS树脂
原产地：日本

产品特色：

- ① 部分手无力的老人可借助把手更好的固定抓握
 - ② 樱花花纹显得时尚，带有浓厚的日本风情特色
- Product characteristics:
- ① Part of the elderly with weak hands can grasp and grip better with the help of the handle.
 - ② Cherry blossoms are fashionable and have a strong Japanese style.

P.s 可适用微波炉洗碗机，可高温煮沸、灭菌消毒
Use caution: microwave oven dishwasher can be used for boiling, sterilizing at high temperature.

两段四脚拐杖 Walking stick



型号: OT-32BR
材质: 铝合金
尺寸: 全长84.5~97mm
重量: 900g

产品特点:

- 曲型设计是为了使老人能够从椅子上起身站立方便用力抓握。
- 握把处采用柔软的海绵材质，使用舒适安全。
- 脚底采用4点支撑，增加稳定性。
- 6段式可调长度。

Product features:

- The curved design is designed to enable the elderly to stand up from the chair and grasp the force conveniently.
- The handle is soft and used sponge material, which is comfortable and safe.
- The bottom of the foot is supported by 4 points to increase the stability.
- 6 segments adjustable length.

三合一拆分腋下拐 Three in one axillary crutch



型号: YC8130T
材质: 铝合金
尺寸: H98~158cm

产品特点:
1) 可折叠，携带方便
2) 选材优质，做工优良
3) 脚垫防滑

脚垫防滑
Padding antiskid



壁厚1.2mm
thickness 1.2mm

同时按下两边弹珠，即可拆下拐杖
Press the ball on both sides at the same time you can remove the crutches

可弯曲带海绵握柄餐具

Bendable spongy handle tableware



1) 餐具柄为不锈钢，前柄可自由按需弯曲

2) 本体采用优质不锈钢不生锈

3) 握柄为弹性海绵，防滑，安全

4) 可适用于洗碗机

5) 耐热110度，可使用合适的干燥机

Product features:

- 1) the handle of the tableware is stainless steel and the front handle can bend freely
- 2) Stainless steel is not rusty with high quality stainless steel
- 3) The handle is elastic sponge, antiskid, safety
- 4) It is applicable to dishwasher
- 5) 110 degree heat-resistant, suitable drier can be used

使用注意:

1) 不能在微波炉和烤箱内使用

2) 不要接触漂白剂会导致海绵掉色

Attention:

1) can not be used in microwave oven and oven.

2) do not touch the bleach, which will cause the sponges to fade

肘杖 Elbow rod



型号: CMS-60S、CMS-60L
CMS-60S: 握把高: 520-770mm
弯高: 180-260mm
重量: 510g
杖脚橡胶头直径: 19mm
CMS-60L: 握把高: 645-970mm
弯高: 200-300mm
重量: 575g
杖脚橡胶头直径: 19mm

产品特点:

- 颜色鲜艳，长短两种可选择
- 脚垫防滑，非常安全
- 质量轻

Product features:

- The color is bright, two kinds of length is optional.
- The pads are antiskid and very safe
- Light quality



脚垫防滑

Padding antiskid

助行器（不带轮不带板） Walker



产品型号: NAKA-YC8207LYH

产品尺寸: 长51x宽45x高74~92cm

产品特色: 1) 产品设计轻巧，折叠易携带
2) 适用于起身行走困难的人帮助运动锻炼康复



可做马桶扶手
Can be a toilet handrail



弹珠在上是固定式，在下是交互式
The marbles are fixed on the top and interactive at the bottom

餐碟（小、大） Dish (small, big)



日本进口商品

型号: 18411小、18401大

主体材质: 聚丙烯(PP)

防滑撑脚: 弹性树脂

耐热: 140°C

原产地: 日本(made in Japan)

产品尺寸 18411: L14mm×W14mm×H4.1mm,容量约350ml
18401: L20.5mm×W20.5mm×H3.5mm,容量约640ml

产品特色: 1)餐碟内特殊的弧度设计, 勺子取食方便
2)背部四角设有防滑垫

Product features:

- special radian design in the dish, convenient for spoon feeding.
- there are antiskid pads at the four corners of the back

使用注意: 微波炉、洗碗机可用, 可高温煮沸、灭菌消毒

Attention: microwave oven and dishwasher are available.

It can be boiled and sterilized at high temperature.

移动支援 Moving support

床垫
家居风
电动床

枕高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销商

清洗消毒设备

租赁服务

适老化改造
照护体系图

公司介绍

电动助行车 Robotic Assist Walker RW-01

上坡时电动助力，下坡时自动减速。Going up a slope. it will assist and help to slowdown during downhill



智能设计 助力长者
快乐出行
“时尚步行者”

轻松助力 Easy assistance

适当减速 Proper deceleration

自动助力 轻松上坡
Automatic aid to ease up the slope

防止偏移 Prevention of migration

自动刹车 移步下坡
Automatic brake step downhill

自动停止 Automatic stop



无需紧握把手即可稳定前行
Without clutching the handle,
you can move forward

手松开后内部感应器会自动感知
The inner sensor automatically perceiving
after the hand is loosened

- 根据使用者身体机能和使用环境可对助力和刹车功能的速度进行4段调节设定。
According to the user's body function and use environment, the speed of power and brake
can be adjusted in 4 stages.
- 各种传感器能感知路面状况和步行速度。自带语音提醒功能，辅助安全步行（日语语音）
Various sensors can sense road condition and walking speed. Voice reminders inside can help walk safely
(Japanese voice)

肘支撑型步行车 Arm Position Walker AP-02S

配合身体做调整，保持良好的行走姿势
Can be adjusted according to the body
to support walking posture

在站着的状态下不容易保持平衡的话，推荐支撑上体的“肘支持型步行车”。
If it is not easy to maintain balance under standing condition, it is recommended to
support the upper body of the "elbow supported walking car".

人性化的纵型手刹设计
最适合手握力比较弱的人群
可根据自身需求调整角度
Humanized longitudinal hand brake
design is most suitable for people
with weak grip. It can be adjusted
according to its own needs

臂托 Arm support

上肢可放置在顶部的臂托中，一边支撑着上体一边步行。因为很容易操作，
所以也可以在早期的步行训练中使用。
Walking at the upper part of the pad to the supporting arms and upper body. It is easy
to handle, and can be used from the early gait training.



折叠状态时



自动刹车轮椅 RH-ZA Automatic brake wheelchair RH-ZA

不倒翁 不会翻倒 安全

向前 为了不向前倾倒的新功能安全脚踏板

A new safety foot pedal to avoid dumping.



向后 为了不向后摔倒安心的自动刹车功能

In order not to fall back and rest at ease the automatic brake function.



紧急情况下，直接站立也安心



万一忘记拉刹车时，也不要紧

安全脚踏板
Safe foot pedal
安心安全刹车
Safety brake
安心

段差消除板 Segment difference elimination plate

在狭小的空间，也能轻松的使用；亦可单独使用
It is also easy to use in a small space. It can also be used alone.

收纳时

适用段差

品名	F-260S	F-220S	F-180S	F-140S	F-100S
长度	260cm	220cm	180cm	140cm	100cm
宽度(收纳时)			66-82(31.5)cm		
收纳时的厚度	11.5cm		13.5cm	15.5cm	
重量	14.5kg	11.5kg	8.5kg	7.2kg	5kg
防滑包边			2.8cm		
最大载重		300kg/套 (每根150kg)			
材料			碳纤维-FRP		
适用段差	13~62cm	11~52cm	9~42cm	7~33cm	5~23cm

折叠型电动代步车 S542 Folding type electric bike S542

merits 美利驰医疗器械（苏州）有限公司



产品特点

可折叠，易携带 Foldable and easy to carry
操纵杆高度可调 Lever height adjustable
专用行李箱（选配） Special suitcase (selection)

Merits 制台湾进口商品

产品参数

本体重量: 25kg(含电瓶)
电瓶容量: 24V 11.5A h
充电时间: 3H

爬楼机 E801 Climbing machine E801

merits 美利驰医疗器械（苏州）有限公司

Merits 制台湾进口商品

产品特点

超小转弯半径，适用于任何狭窄的楼梯和陡峭的楼梯
Ultra small turning radius, suitable for narrow environment and steep staircase.座椅角度可调，确保乘坐过程中的舒适性。
The seat angle is adjustable to ensure comfort during ride.

产品参数

尺寸: L1040xW670xH1050
自重: 70kg
最大载重: 130kg
最大爬坡: 35°
电池: 12V/22AHx2
最长行駛时间: 30min

移动支援 Moving support

FranceBed 制日本进口商品



床垫
家居风
电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床垫
护理床
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护
适老化改造
系统图

公司介绍

健走神器 Advance Pole

越野行走开始健康长寿的第一步！健康长寿的第一步首先是【行走】
The first step of the healthy and long life is the cross-country walk! The first step in a healthy and long life is to be [walking]

AD-01
粉色



AD-02
黄色



2根杆行走姿势
更好

综合自己的体力
开始越野行走



健走神器 2根 1组

尺寸: L:95~125cm

重量: 480g/ 组

材质: 青铜铝 · 树脂

颜色: 粉色、黄色

以下人群推介使用

- 对自己的体力没有信心
- 运动不足
- 因腰痛 · 膝盖痛等造成平时行走困难
- 高血压 · 糖尿病患者

为了保持健康和增强体力



发光 LED 拐杖 Light Cane

使用发光拐杖，夜晚走路更安心，发光拐杖易被汽车发现避免被车撞伤发光拐杖能看清脚下障碍物，避免被绊倒。
Using light cane, walking at night is more secure. Light cane is easy to be found by cars and avoid being hit by cars. You can see obstacles at the foot and avoid being tripped.

伸缩款




LC-03



重量: LC-03 380g

长度: LC-03/LC-04/LC-05:750 ~ 900mm

LC-04

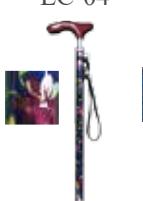

重量: LC-04 360g

长度: LC-03/LC-04/LC-05:750 ~ 900mm

LC-05



重量: LC-05 375g

长度: LC-03/LC-04/LC-05:750 ~ 900mm

LC-09



重量: LC-09 320g

长度: LC-09:320g

LC-10



重量: LC-10 320g

长度: LC-10:780 ~ 930mm

折叠/伸缩 2合1款



在晚上使用手杖时，只需轻轻敲击地面激活内置感应器，LED灯即可点亮，让人注意到了自己的存在。
When you use your walking stick at night, you only need to gently tap the ground to activate the built-in inductor, and the LED light can light up, so that can notice their existence.

LC-12F



重量: LC-12F 305g
长度: 730 ~ 830mm

LC-13F



重量: LC-13F 300g

LC-15F



重量: LC-15F 320g

LC-17F



重量: LC-17F 335g

LC-20F



重量: LC-20F 300g



安心手杖 Walking stick

同时使用两根手杖，步行更稳定

Two sticks using at the same time is more stable.

5种颜色可供选择



粉色



红色



紫色




棕色

尺寸: L:80~114cm(18段调节)

重量: 225g/ 组

材质: 青铜铝 · 树脂

青绿色

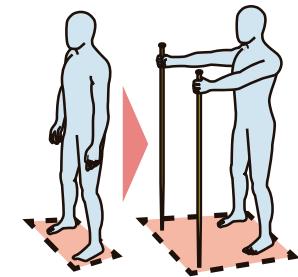

易使汽车发现
避免被车撞伤

看清脚下障碍物
避免被绊倒

脚底灯采用了耐久性好的LED灯。充电不足时蓝色和白的灯交替闪烁并通知。

The foot lamp uses a good durable LED lamp.
When the charge is insufficient, the blue and white lights flicker and notice.

SG标志是由产品安全协会制定的。在结构、材质、使用方法等符合安全标准的产品的标志。

The SG logo is made by the product safety association. Products that conform to safety standards in terms of structure, material and methods of use.



基础调节型轮椅 BM22-45S Basic adjustable wheelchair



方格绿
Green
方格兰
Blue

尺寸：W635×L965×H860mm
折叠后：W340×L965×H660mm
重量：13.3kg
材质：铝合金

功能/Function
(Aluminium alloy)

标准型轻便轮椅，自走护理兼用可折叠。
固定扶手连动式刹车前后轮无需充气，
一体式座背垫，脚踏板高度可调节。

多功能型轮椅 KZM22-42-45 Multifunctional wheelchair



方格兰
Blue
方格绿
Green

尺寸：W610×L1010×H900mm
折叠后：W340×L1010×H740mm
重量：16kg
材质：铝合金

功能/Function
(Aluminium alloy)

多功能调节型轮椅、自走护理兼用可折叠扶手，
可上掀、可调节鼓式刹车前后轮无需充气座背垫紧度
可调节座面深度可调节、座面高度三段调节。

自由躺靠式 RR60NB Free reclining



No.41
Purple
No.43
Green

尺寸：W610×L1870×H1240mm
折叠后：W610×L1000×H670mm
重量：24kg
材质：铝合金

功能/Function
(Aluminium alloy)

靠背使用气压缸，与腿部连动构成自由躺靠类型
轮椅车。坐背垫乘坐舒适，即将长时间使用也不
觉疲劳。

一台三用的步行器兼轮椅车“爱&勇气”之AY18

A three purpose Walker and wheelchair AY18 of "love and courage"



座背垫三色可选
Seat cushion has three color optional

No.85
鲜绿色
Fresh green

No.84
橘色印花
Orange printing

**No.82
×
No.83**
碳灰色*浅蓝色
Carbon grey * light blue

作为自走用轮椅
As a wheelchair

作为自走用轮椅
As a wheelchair

As a wheelchair for nursing

作为护理用轮椅
As a wheelchair for nursing

作为步行器
As a walker

As a walker



驱动 Drive
乘坐 Ride
步行 Walk

作为自走用轮椅车→扶手位置
往后 置物袋→挂在后面

作为护理用轮椅车→扶手位置
往后 置物袋→可随身携带

作为步行器→扶手位置往前
置物袋→至于座面上

沐浴用轮椅 KS12 Bathing wheelchair



绿色

黄色

身体、坐垫都好清洗的沐浴用轮椅


A bathing wheelchair with good cleaning of the body and cushion

波浪形车架

从背部到臀部易清洗的波浪形车架。加大与身体之间的间隙，从后面和侧面易伸手的车架结构。

Wavy frame

A wavy frame that is easy to clean from the back to the hips. Increase the clearance between the body and the frame which is easy to extend from the rear and side.

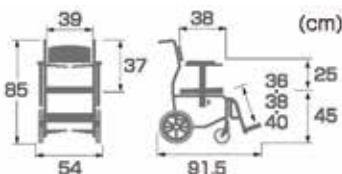

国产1号 STC-01




技术参数/technical parameter

尺寸：(宽)400x(长)400x(厚)120/70 mm
(宽)420x(长)400x(厚)120/70 mm
(宽)460x(长)400x(厚)120/70 mm


材质：坐垫主体-聚氨酯
坐垫布套-防水莱卡布，牛津布，PVC防滑布

功能
人体工学结构，有很好的减压效果（参考下图）
缓解长期坐姿的疲劳，减小褥疮产生的风险，保持体位


未使用坐垫的臀部压力分布
(红色代表压力集中处)

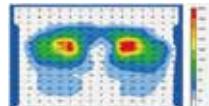

使用国产1号坐垫10分钟后的
臀部压力分布
(压力集中处消失，压力被分散)

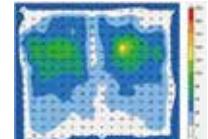

符合人体工学的多层次多面体结构

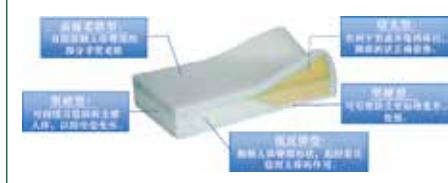

家居风电动床

高级羽绒被

全身按摩器

电动护理床

护理床用品

生活支援用品

移动支援用品

经销商

清洗消毒设备

租赁服务

照护体系改造

公司介绍

助行手推车 Smart walker



特点 1 操作简单·折叠方便
Features 1 easy to operate and easy to fold



特点 3 轮胎方向的设定
Setting of tire direction



特点 2 单键调高·刹车停车
Feature 2 single key high brake stop



调高 Height adjust

刹车停车 Brake and stop

尺寸: W400×L540×H790 ~ 910mm

重量: 4.7kg

材质: 架子 铝制品 Frame aluminum

轮子 EVA Wheel EVA

坐面 聚酯 Seat polyester

坐便椅 Portable toilet

便携式坐便椅 JASPITA



矫正排泄姿势，防止尿水洒落的海豚嘴型坐便椅防止尿水飞散的“防止板”
容易辨认便座和盖子是否已盖好
“安装式污水接受槽+污水桶”更卫生
Correct excretory posture
Prevent urine from falling
"Installation sewage receiving tank + water bucket" is more hygienic


便携式坐便椅 FX-CP



总宽550mm，超小型，不占用空间
充分考虑了排泄姿势，移乘动作，
入座动作，扶手高度300mm，便座
高度无阶段调节

The width is 550mm which is compact
Seat height free adjustment


家居风坐便椅 CP

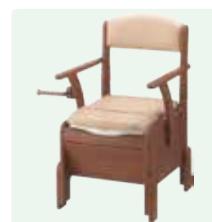

座面宽度为400mm。坐上去无
狭窄感弧形支柱设计的扶手形
状容易清理排泄，不易造成阻碍

The width of the seat is 400mm. It
is easy to clean up and remove the
handrails which are designed as
arc shape without a narrow sense.

家居风坐便椅

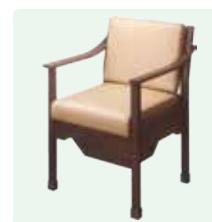

满足了使用者对坐便椅的
“高大上”要求既可以作
为移动式坐便椅，又可以
作为椅子

Household style which can be
a portable toilet and a normal
chair.

洗澡椅 Shower chair

折叠洗澡椅 TS



尺寸: W520×L500×H670~770mm
(折叠时Folding: W520×L160×H800~925mm)
重量: 5kg
材质: (座部, 背部, 旋转台) PE
(扶手, 旋转面) PP
(握柄) 合成橡胶 Synthetic rubber
(软垫) EVA (管) 铝合金 Aluminium alloy

不使用时收纳非常方便，折叠后宽仅16cm。
When it is not used, the storage is very convenient,
and the width is only 16cm after folding.

扶手式洗澡椅 HP



尺寸: W545×L490×H670~820mm
(座面高度Seat: H350~500mm)
重量: 5.2kg
材质: (座部, 背部) PE
(扶手) PP
(握柄) 合成橡胶 Synthetic rubber
(软垫) EVA (管) 铝合金 Aluminium alloy

U字槽的设计是人坐着即可从前后清洗下身
可坐于座面中央，更安心
臀部不易陷入的座面软垫
The U slot is designed to clean the lower body from front to
back when sitting.
It is more comfortable to sit in the middle of the seat.
The hips are not easy to get into the cushion.

折叠式洗澡椅 KT130°旋转



尺寸: W520×L500×H670~770mm
(折叠时Folding: W520×L160×H800mm)
重量: 5.4kg
材质: (座部, 背部) PE
(扶手) PP
(握柄) 合成橡胶 Synthetic rubber
(软垫) EVA (管) 铝合金 Aluminium alloy

便于移乘，护理的旋转式座面
可抬起扶手
Rotating seat surface is good for transfer and nurse
Can lift the armrest

扶手式洗澡椅 360°旋转



尺寸: W510×L510×H670~780mm
(座面高度Seat: H360~460mm)
重量: 6.3kg
材质: (座部, 背部, 旋转台) PE
(扶手, 旋转面) PP
(握柄) 合成橡胶 Synthetic rubber
(软垫) EVA (管) 铝合金 Aluminium alloy

360°旋转，稳定的坐在座位上即可安心护理
可抬起扶手
360 degree rotation, easy to get care
Can lift the armrest

足部舒适 5 大特点 5 features of foot comfort

1) 以体重移动为控制器，支持步行

Taking body weight as a controller to support walking

①随着年龄的增长，骨骼发生变化。

As the age increases, the bone changes.

②出现O型腿倾向，体重会向外倾斜，脚和膝盖的负担变大。

The O shape leg tends to tilt outward, and the burden on the foot and knee becomes larger.

③如果步行时缺少稳定感很容易跌倒。

If there is a lack of stability on foot, it is easy to fall.



减轻膝盖的负担，使移动顺畅。

Reduce the burden of the knee and make the movement smoothly.

采用<脚轮控制器系统>。

2) 轻得可以浮在水面上 It's light enough float on the surface of the water

鞋底采用添加了超轻型Expancel成分的橡胶减轻了脚的负担。

The sole is made of super light Expancel rubber, which reduces the burden of the foot.



3) 不易摔倒，安心 It is not easy to fall.

将脚趾向上卷20mm，脚后跟向上卷12mm, 防止绊倒。能够顺利的着地和踢出

Roll your toes up 20mm and heel up 12mm to prevent tripping which can be smooth and kicked out



4) 穿脱便捷 Easy to wear off

鞋的上部使用大开口尼龙搭扣，穿脱变得很简单。

The upper part of the shoe is made of big opening Velcro, and it is very simple to wear.



5) 安心·安全的日本制造 Safe manufacturing in Japan

所有的“快步主义”都是日本制造。

All the fast steps are made in Japan



健步鞋 Medical Walk Shoes

功能优点 Functional advantages

1) 实现保护膝关节的理想化步行。 Idealized walking for protecting the knee joint

通过SHM功能，鞋底后跟部的螺纹构造

①接触地面时在体重的压力下变弯

②脚踩下去后，以脚跟为中心，为稳定的膝盖提供适宜的步行方式

Through the function of SHM, the screw structure of the heel of the sole

① bend under the pressure of body weight when touching the ground

② After stepping down, the center of heel should be the center to providesuitable walking for stable knees.



2) 分解吸收对膝关节的冲击力。 The impact of decomposition and absorption on the knee joint

脚跟的冲击力会直接传导至膝盖，也会增加膝关节的负担。SHM功能可以通过橡胶的弹力吸收脚跟着地时的冲击力。并且，通过螺纹的旋转力分散冲击力。这样可以有效缓解膝关节的负担。

The impact of the heel will be directly transmitted to the knee, and it will also increase the burden on the knee joint. The SHM function can absorb the impact force of the heel on the ground through the elastic force of the rubber. Moreover, the impact force is dispersed by the rotation force of the thread. This can effectively relieve the burdens of the knee.



3) 有效利用稳定膝关节的大腿内侧肌肉。 The effective use of the medial thigh muscles to stabilize the knee joint

可以在步行时有效利用用来稳定膝关节的大腿内侧肌肉。通过活动平时不怎么用到的该部分肌肉，可以改善身体条件，达到健康步行的目的。

It can be used effectively to stabilize the medial thigh muscles of the knee during walking. This part of muscle that is not used at ordinary times can improve physical condition and achieve the purpose of healthy walking.

尺码: 35 36 37 38 39 40

鞋底材质: 橡胶发泡

开口深度: 浅口鞋头

后跟高: 低跟(1-3cm)

无线微型扩听器 SKY VOICE II



输送器和接收器需要同时使用，
充电2小时可连续使用14小时超轻设计，
输送器9g，接收器11g迷你设计，和拇指一般大小。
Convey and receiver need to be used at the same time.
Charged for 2 hours can be used continuously for 14 hours.
Super-light design, conveyor is 9g and receiver is 11g.
Mini-design and almost the same size as the thumb



迷你轻便，各约 10g
Mini-size and light/10g each



能两台同时充电的专用充电器
Be charged together for two machines

骨传导型扩听器 CLEAR VOICE

骨传导和一般的空气传导不同，它是通过颅骨的振动将声音直接传导到内耳，从而减轻耳膜的负担重量仅为70g。手握一下就开，放手就关，不管担心忘记关机。

小巧玲珑只有手掌大小。充电式设计，方便循环使用。
锂电池一次充电3.5小时可连续使用40小时。

Bone conduction is different with normal air, which convey the voice directly to inner ear by skull vibration to ease burden of eardrum.

The weight is only 70g.

Once grasp it will be on and off if you release.
It is so smart and only the similar size to the palm.

Charging style is convenient for cycle use.
Lithium battery once be charged for 3.5 hours, it can be used for 40 hours.



<规格>

电源：AC充电插座（AC=100v~240v）；周波数特征：
200Hz~5.5KHz；音压等级（骨传导）：138dB ±5dB SPL
最大输出（骨传导）：58dB ±5dB；骨传导振动子电阻：8Ω；骨传导耳机电阻：16Ω
盒子尺寸：长47×高111×宽28（mm）；本机重量（包括电池）：70g；
使用电池：锂离子；电池充电时间：约3.5小时 连续使用时间：约40小时
<附属品>
充电用插座（PSE规格品）；骨传导耳机（耳栓式）长1.2m
挂件绳、支架（放口袋等时辅助使用、使用说明书
※产品的规格，颜色，形状等可能因设计改变而改变，请以实物为准。


无线接受信息，能够清晰地扩大传导的声音。

不会有任何不舒适的感觉，让您轻松谈话交流。

输送器可置于领带、口袋等衣物上，也可置于电视机等发声机器旁。

接收器可用耳钩轻松挂于耳上，清楚地听见无杂质的声音。

The receiver can receive the information wirelessly and enlarge the voice clearly.
There is no uncomfortable feeling and keep you communicate easily.
The conveyor can be clipped on tie, pocket and so on. It can also be placed near the television and so on. The receiver can be hang on the ear easily with the hook.
Then you can hear the pure voice.

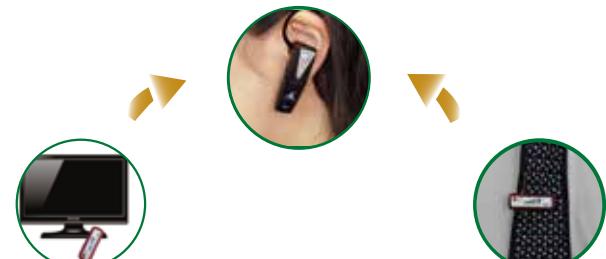

输送方、接收方请一起使用。

Use conveyor and receiver at the same time

发送方（麦克风、发信方）规格

发送内容：数字信号；通信方式：单向传输；使用周波数：2.4G
声音周波数特征：200Hz-5KHz；声音最大输出：114dB
传达距离：7m；重量：9g；尺寸：W18mm×L51mm×H12mm
使用电池：锂电池3.75v；充电时间：2小时以内；使用时间：
最大使用14小时；待机时间：最大使用180小时；输出阻抗：
16Ω；电容器麦克风：-40dB；电源：充电式

接收方（扩音器、耳塞）规格

接收内容：数字信号；通信方式：单向传输；使用周波数：2.4G
声音周波数特征：200Hz-5KHz；声音最大输出：114dB
传达距离：7m；重量：11g；尺寸：W52mm×L18mm×H10/30mm
使用电池：锂电池3.75v；充电时间：2小时以内；
使用时间：最大使用14小时；待机时间：最大使用180小时；
输出阻抗：16Ω；电容器麦克风：-40dB；电源：充电式

骨传导型耳背式扩听器

Bone Voice



能清楚的把声音扩大

把音量调到最小切断电源，放入耳塞

开电源时注意不要触摸麦克风部分，调整音量，
如果不按照顺序操作可能有杂音

取出时先切断电源不要触碰到其它按钮

开机长按按钮约3秒指示灯显示绿色，关机也是长按按钮约3秒
指示灯显示红色

Clearly expand the sound

Turn the volume to the minimum power and put in the earplug.
Be sure not to touch the microphone part and adjust the volume when
the power is open. If you do not follow the order, there may be a
murmur. Cut off the power when taking out the earplug, do not touch
other buttons. When you turn on, press button for 3 seconds. The
indicator light is green, and the shutdown is also pressing for 3
seconds till indicator light shows red.


<规格>

重量仅为13.3g
可连续使用18小时
最大噪音：40-45分贝
频率特性：20Hz~8KHz
配件：主机
充电器（标准准备用接头）
骨传导耳背式芯片
说明书（保证书）
选择右耳勾或左耳勾


组合家具·移门 A combination of furniture and moving doors

间壁柜 UD Furniture 系列

多床房里设置高度适宜的隔断柜，更好的保护个人隐私。节省空间的同时，通过组合柜保证必要的收纳空间。
Multi bed rooms are equipped with highly suitable partition cabinets to better protect personal privacy. While saving space, the necessary storage space is guaranteed through combination cabinets.

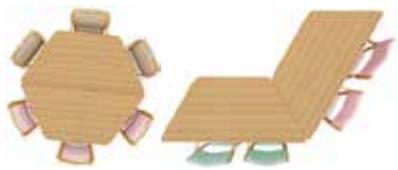

图片为定制实物拍摄图

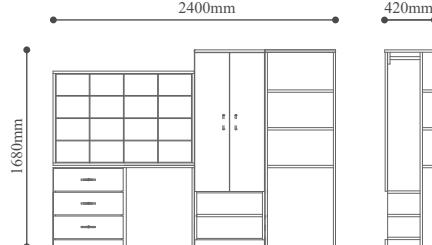

采用日本设计，零甲醛加工方法为日本公司自行研发技术。

四个桌脚均由日本进口。轮椅无障碍自由进出，桌面四角均为圆弧 R 角防止碰伤。
桌面四边内弯设计增加身体和桌面的贴合度。桌脚十档高度调节，适用人群更广泛。



方便

高度调整桌子 UFT-4T1690

尺寸：W1600×D900×H596-796mm 1 台

高度：596mm-796mm 之间调节，20mm x 10 档

材质：桌面：低压三聚氰胺装饰板（两面）

桌脚：金属 + 木纹贴面

采用日本设计，日本养老设施内常用款。

椅子框面颜色深浅两种可选，坐面颜色四色可选。坐面采用 PVC 皮革方便清洁。
扶手特殊弯弧设计。所有接触面均为圆弧避免碰伤。



椅子 UFC6

尺寸：W560×D560×SH420mm 4 台

材质：靠背：天然木

框架：合成板聚氨酯涂装

坐面：外部为 PVC 皮革，内芯为高弹海绵

折叠门 Folding door


折叠门的地面光滑平整，且能节省空间。开门时需要的空间较小，不需要占据墙面就能确保有效宽度。

特别适合卫生间等环境。折叠门在日本的养老设施被广泛使用

The floor of the folding door is smooth and flat and saves space. When opening the door, the space needed is smaller, and the effective width can be ensured without occupying the wall. It is especially suitable for the toilet and other environment. The folding door is widely used in Japan's old-age facilities

省空间


与以往的门相比，门的开闭所需要的
空间特别少。（约1/3）

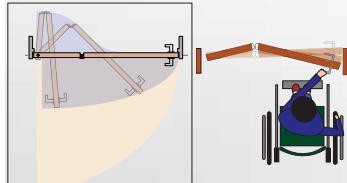

折叠门开关时的轨迹图

不需要门框

无门框的设计，在扶手的安装中
没有限制。另外，施工墙面的宽裕
不影响设计、施工。

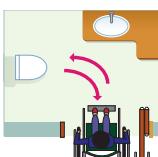

无障碍的设计

因为是上吊型，脚上没有
台阶，最适合看护设施、
福利设施、诊所等间隔间。



有保护的设计

在门的下部 · 框上加上防护零件，
可以防止轮椅和床的冲击，防止受伤。




墙壁扶手 I型、L型 Wall handrail I type, L type

扶手的品质和强度适合用公共住宅、公共区域、老年公寓和养老院。

方便抓握波浪型设计。

不易勾住袖口的保护套设计。

The quality and strength of handrail are suitable for public housing, public areas, apartments for the elderly and nursing homes. Wavy design is very handful to grasp. Protect cover at both sides is not easy to get the cuff hooked.

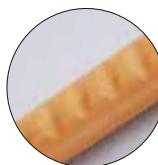

方便抓握波浪型
Wavy design
easy to grasp

两边有保护套
Protect cover
at both sides

百搭 I型扶手 I type handrail

产品名 production name	型号 model	尺寸 size L	颜色 color
35百搭系列 I型扶手	BG-101MB	φ35 x 400	棕色 Brown
	BG-101CG	φ35 x 400	金色 Gold
	BG-102MB	φ35 x 600	棕色 Brown
	BG-102CG	φ35 x 600	金色 Gold
	BG-103MB	φ35 x 800	棕色 Brown
	BG-103CG	φ35 x 800	金色 Gold



材质:实木
把手 锌合金

Material:Wood
Linking part: Kirsite

墙壁扶手 L型 Wall handrail L type



稳姿站立 stand stably
挪动重心 move
保持姿势 keep gesture

材质:实木 Material:Wood
把手:锌合金 Linking part: Kirsite

产品名 production name	型号 model	尺寸 size HxW	颜色 color
墙壁L型扶手	BGP-01MO	φ32 x 800 x 565	棕色 Brown

消除段差斜坡 Elimination of gap slope



使用多层复合板的高级成品

自带凹槽
顶端无障碍的段差为3mm
坡度设定在1/4以下(约14°)
边缘圆角设计,对于室内氛围比较和谐
底面附有固定用的双面胶

橡木色使用案例
Medium oak case



橡木色 Medium oak



浅色 Clear

Upgrade product using laminated wood

Grooved design

The gap from top to bottom is 3mm

The slope angle is set under 1/4 (about 14°)

The round design at the edge is also good for the room atmosphere

Double faced adhesive tape on the bottom

产品名 production name	型号 model	尺寸 size	颜色 color
消除段差斜坡	D×14	H14 x D46 x W800	橡木色 oak
	D×25	H25 x D92 x W800	橡木色 oak
	D×35	H35 x D134 x W800	橡木色 oak
	D×50	H50 x D196 x W800	橡木色 oak

顶天立地扶手 Vertical rail

“顶天立地”支柱和横向扶手可以有效帮助使用者从座位上轻松站立。

即使在难以放置常规扶手的床边等狭窄室内空间，也可以固定在地面到天花板之间，安装非常简便。

横向扶手φ32波浪型设计，横向扶手也是便于抓握的φ32。

横线扶手高度在750~850mm之间有6段可调节，每段间距为20mm。

Support rail can effectively help users to stand easily from their seats.

Even if it is difficult to place a conventional handrail in bedside and other narrow space, it can also be fixed between the ground and ceiling. The installation is very simple.

The horizontal handrail is φ32 wave design, it is also easy to grasp.

The height of the handrail is between 750 and 850mm with 6 segments adjustable and the distance between two segments is 20mm.



BZH-101-A 室外用
地板尺寸 W200xL200



BZH-01
地板尺寸 W500xL600



BZH-02
地板尺寸 W205xL650

BZH-01

规格 Specification

颜色：米色 Beige

材质：扶手 铝合金管 Handrail Aluminum alloy

外观 塑料 Appearance plastic

地板 铁板 Floor iron plate



BZH-101-A
室外用 Outdoor use

BZH-02



BZH-02

处处扶手 Everywhere handrail

有效帮助从床上坐起以及从沙发上站立等活动。

扶手部分采用抗菌处理。

It helps to sit up from bed and stand on sofa.

The armrest part was treated with antiseptic treatment.



BZ-NO1



规格 Specification

颜色：米色 Beige

尺寸：W500×L600×H720 ~ 800mm

材质：扶手 铝 Handrail Aluminum

地板 铁板 Floor iron plate

BZ-NO2



规格 Specification

颜色：米色 Beige

尺寸：W500×L900×H720 ~ 800mm

材质：扶手 铝 Handrail Aluminum

地板 铁板 Floor iron plate

便器扶手 Toilet handrail



规格 Specification

扶手高度：H580mm~680mm

产品主材：树脂，半硬性树脂Resin

亚铅镀锌钢板Lead galvanized steel plate

特点

扶手可以随意上抬，方便使用。

易握设计，牢牢抓握，更安全。

6段调节，最大程度支撑站立。

Feature

Handrails can be lifted at will and easy to use.

Easy grip design, firmly grasp, more safe.

6 section adjustment, the maximum support to stand.




复合塑胶卷材

HOSPILEUM NW



1919年，TOLI作为日本首家综合性室内装饰材料制造商在兵库县伊丹开始了事业。在日本拥有五个工厂，销售网点分布全球各地。随着老龄化社会的来临，在越来越重要且需求多样化的医疗设施及高龄人群设施当中，内部装饰材料也备受关注。为此TOLI开发了最适合医疗养老设施使用的特殊功能塑胶卷材、塑胶片材、方块地毯以及墙纸等，致力于营造舒适健康的适老化居住环境。

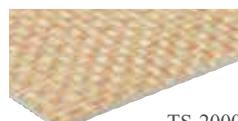

TS-2000

规格

尺寸: W1820mm×L9000mm



厚度: H2.0mm 高耐久抗菌UV树脂涂层

包装: 9m/卷 16.38m²/卷

28SF-3000

规格

尺寸: W1820mm×L9000mm




厚度: H2.8mm 高耐久抗菌UV树脂涂层

包装: 9m/卷 16.38m²/卷

TS2121




TS2125

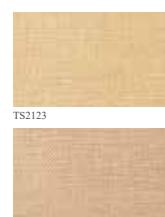


TS2123




TS2127

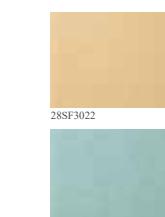

28SF3022

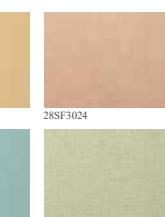


28SF3024

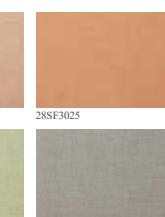

28SF3025



28SF3027

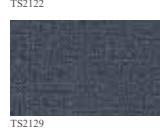

TS2122



TS2126



TS2124



TS2128



28SF3026



28SF3023



28SF3028



28SF3029



TS2129



北京日经丽彩科贸有限公司

北京日经丽彩科贸有限公司是一家集经销批发、招商代理的有限责任公司，建材、壁纸、施工辅料、墙面艺术、装修建材、墙纸、基膜、胶粉、胶浆、壁纸胶、进口壁纸、日本壁纸是北京日经丽彩科贸有限公司的主营产品。北京日经丽彩科贸有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。北京日经丽彩科贸有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

北京日经丽彩科贸有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。



除臭



抗菌



防霉

清洗消毒设备 Cleaning and disinfecting equipment

ATAM 技研株式会社

ATAM 制日本进口商品

小型综合性清洗·烘干机 反复清洗 Pro-II RF-052 Small comprehensive cleaning and drying machine
采用环保洗净方式，节水的同时又能强力洗净。能够通过温水和洗涤剂洗净污渍和食物残渣。

Environmental protection washing method is adopted, saving water and washing vigorously.
Stains and food residues can be washed with warm water and detergent.



清洗前 Before cleaning

清洗后 After cleaning



清洗前 Before cleaning

清洗后 After cleaning

强劲的洗净力
彻底排除残留物
采用连续洗净马达
节水环保
风箱高速干燥
清洗到干燥最快45分钟完成
也有标准60分钟和高速模式
Strong washing power
Completely eliminate the residue
Use a continuous cleaning motor
Water saving and environmental protection
High speed drying of the bellows
Clean to dry up in 45 minutes
Standard 60 minutes and high speed modes

机器尺寸：W850mm×D400mm×H2100mm

重量：200KG

电源：三相 200V

耗电率：5KW

其它：LED 机内照明 窗格玻璃

轮椅车轮清洗机 RW-03S Wheelchair wheel cleaning machine

专利刷构造，超级清洁力，轮椅的车轮清洗作业的省力和标准化

主打清洗宽度狭小的轮椅。另外，各款轮椅，步行器等车轮清洗也都可以使用。

Patent brush construction and strong cleaning power. Labor saving and standardization of wheel cleaning operation in wheelchair
To clean the wheelchair with a narrow width. In addition, wheel cleaning of various wheelchairs and walkers can also be used.



四轮同时清洗
4 wheels cleaning meanwhile

强刷平均 10 分钟对轮子进行清洗

新开发驱动部，左右刷子间距的最大幅度是后轮侧 60mm，前轮侧 40mm。
至此为止，洗净性能和耐久性提高了，维护也更轻松。

Cleaning the wheels by an average of 10 minutes

The maximum distance between the left and right brushes is the rear wheel side 60mm and the front wheel side 40mm.

Up to now, the washing performance and durability have been improved and the maintenance is more relaxed.

机器尺寸：W980mm×D996mm×H940mm

重量：80KG

电源：三相 200V 130W

防水：驱动马达：IP67



清洗前 Before cleaning

清洗后 After cleaning



清洗前 Before cleaning

清洗后 After cleaning

家居风电动床

高级羽绒被

全身按摩器

电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护体系改造图

公司介绍

清洗消毒设备 Cleaning and disinfecting equipment

床垫
家居电动床

枕高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备

租赁服务

照护
适老化
体系统
改造

公司介绍


S.A.T 三协 AirTech 株式会社

S.A.T. 制日本进口商品

润利奇高度清净空气净化型加湿器 SAT-UR2MM-2

Highly clean air purifying humidifier SAT-UR2MM-2

只有 **URUORICH** 结合了强大的加湿与空气清净功能
Only URUORICH combined with powerful humidification and air tranquil function

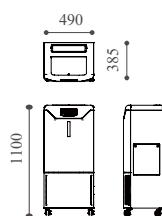

加湿量: 2.2kg/h
除尘效率: 95%以上
适用面积估算: 150m²
风量: 弱320m³/h, 中550m³/h, 强780m³/h
电源: 220V 50Hz
耗电量: 94W
给水方式: 手动给水 (20L)
重量: 52kg



儿茶素预滤网 Catechin prefilter
去除颗粒较大之粉尘的同时, 透过儿茶素去除甲醇与其臭味
Removal of large particles of dust and methanol and its odor through catechin

纯水蒸气加湿装置 Water vapor humidifier
纯水蒸气滤网只能通过纯水无菌的水蒸气, 不会释放水中所含杂质、霉菌、杂质等有害物质
Pure water vapour screen can only be sterilized by pure water vapor, and will not release harmful substances such as bacteria, mold and impurities in the water.

等离子气体发生器 Plasma gas generator
透过结合负离子与纯水蒸气的技术, 发挥持续性的杀菌、除臭效果
Continuous sterilization and deodorization through the combination of negative ions and pure water vapor technology.

蛋白质杀菌滤网 Protein bactericidal filter
去除颗粒较小之粉尘的同时, 将捕捉到的细菌或病毒99%以上杀菌、使之失去活性
While removing small particles of dust, more than 99% of the bacteria or viruses can be killed and inactivated.


臭氧除臭专用机 SAT-GF系列 Special machine for ozone deodorization

凭借出众除臭能力为您提供舒适空间, 最新款小巧轻量型可轻松移
With the ability of superior deodorizing, we provide you with comfortable space, the latest compact model and can be easily moved.

移动型 SAT-48GFI




适用面积估算: 60m²
臭氧发生量: 弱 24mg/h, 强 48mg/h
风量: 72m³/h
电源: 220V 50Hz
耗电量: 35W
尺寸: 宽350×高250×厚70mm
重量: 5.5kg

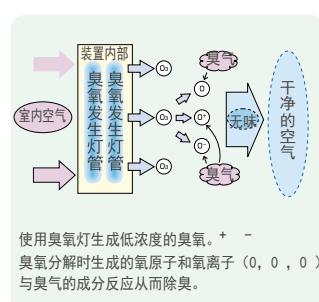

使用臭氧灯生成低浓度的臭氧。+ -
臭氧分解时生成的氧原子和氧离子 (O, O, O)
与臭气的成分反应从而除臭。

壁挂型 SAT-48GFK

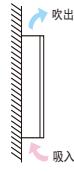

定时运转可以根据房间的面积, 臭气的浓度设定臭氧量。
因为采用臭氧灯的方式, 所以可以生成不含NOx(氮氧化物)或杂质的臭氧。
因为采用逆变器式冷阴极管, 能够延长灯管的使用寿命, 实现低成本运行。
因为使用24小时定时全自动运转, 所以操作简单。

Regular operation can set ozone volume according to the area of the room and the concentration of odor.
Because ozone lamps are used, ozone can be produced without NOx (nitrogen oxides) or impurities.
Because inverter cold cathode tube is used, it can extend service life of lamp tube and achieve low cost work.
It is easy to operate because it is fully automated at 24 hours.



智能中央控制系统准分子 EXCIMER

臭氧杀菌装置 Exciman



利用不含水银的准分子灯24小时杀菌、除臭、防虫, 击退诺罗病毒
Use mercury free excimer lamp for 24 hours sterilization, deodorization and pest control to fight off norovirus.

杀菌的杀菌原理

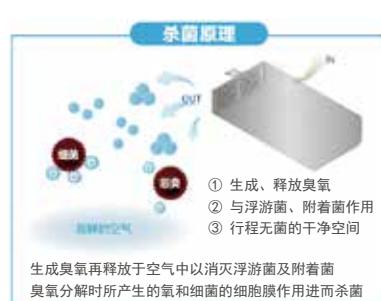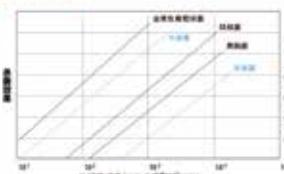

生成臭氧再释放于空气中以消灭浮游菌及附着菌
臭氧分解时所产生的氧和细菌的细胞膜作用进而杀菌

适用场所

- 酒店 - 烟草加工厂 - 环保回收场 - 无尘室 - 肉品、水产加工厂

- 超市 - 制药厂 - 美容医疗设施 - 药房 - 游泳池

- 食品 - 化妆品 - 医疗器械 - 餐厅 - 游泳池



世界首创
环境改革

一台即可杀菌
除臭、防虫

智能控制系统

采用氙气(Xe)准分子光源方式不含水银灯管。未使用会造成环境污染的水银。

Xenon (Xe) excimer light source does not contain mercury lamp.
Mercury that is not used will cause environmental pollution.

在无人情况下, 利用高浓度的臭氧熏蒸方式将宽敞空间的各个角落杀菌、防虫, 有人的情况下, 则是释放低浓度的臭氧来除臭、抑制细菌滋生

Under the case of no one, high concentration of ozone is used to sterilize and prevent insects from all corners of the spacious space.
If there's people, the low concentration of ozone is released to deodorize the bacteria and inhibit the breeding of bacteria.

控制臭氧生成量最多4000mg/h再加上可个别调整灯箱释放的臭氧浓度量的智能中央控制系统。无论空间大小皆能适当管理浓度。
Ozone generation is controlled at most 4000mg/h plus an intelligent central control system that can individually adjust the ozone concentration released by the light box. The concentration can be properly managed regardless of the size of the space.

TKC 东海机器工业株式会社

轮椅车轮清洗机 RM2 Wheel cleaning machine

把车轮清洗的重劳动改为自动化，减轻作业人员负担。

自动运转中，人员可做其他作业，提高工作效率。

Change the heavy labor of wheel cleaning to automation and lighten the burden of operators. In automatic operation, people can do other tasks to improve work efficiency.



尺寸	W1160×L430×H275mm
重量	50kg
电源	单相100V 60W

只需把车推上，车轮上的顽固污渍即可清理干净。
不仅自助式，护理用、手推式即使电动式也可以清洗。
车轮侧面也同时清洗。
体积小巧，不占空间。

Just push the car and clean the stubborn stains on the wheels.
It is not only self-service, but electric and manual can be cleaned.
The side of the wheel is also cleaned at the same time.
It is small in volume and does not occupy space.

TKC 制日本进口商品



臭氧·超小型高压高温水清洗机 O-3-750

Ozone and super miniature high pressure and high temperature water cleaning machine



尺寸	W445×L915×H820mm
重量	140kg
能源	煤油 (2.5 ℥ /H)
电源	单相100V

用高压高温水清洗去掉异物。
用臭水除菌，除臭。


Remove the foreign body with high pressure and high temperature water. Ozone water is used to remove bacteria and deodorize.

江苏芙兰舒床有限公司

臭氧消毒箱 Ozone sterilize box

本装置是能够将床来进行全自动杀菌消毒的室内安装型杀菌器，用无水银管来产生臭氧进行杀菌消毒。

The device is an indoor installation sterilizer capable of automatically sterilizing the bed. Ozone is produced by an anhydrous silver tube to sterilize.

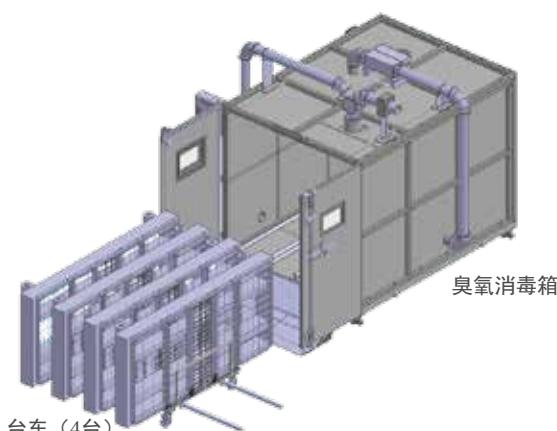

正门是左右对开构造，设有小窗

正门设有联锁，杀菌过程中门处于关闭状态

内部设有臭氧浓度探测仪


由于是简易密闭构造，臭氧的可泄露量在0.005ppm以下

The front door is a left and right open structure with a small window.
The main door is interlocked, and the door is closed during sterilization.

Internal ozone detector

Because it is a simple closed structure, the leakage of ozone is less than 0.005ppm.

对代表性细菌的臭氧杀菌能力

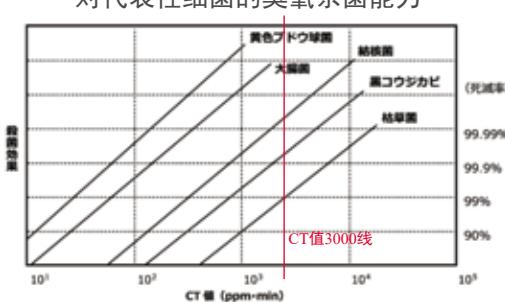

日本食品分析中心测定结果摘要

※ CT值=浓度(ppm) × 喷雾时间(min)

<参考> CT值600=2ppm × 300min 在臭氧浓度为2ppm的情况下，
经过300min的杀菌消毒后黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀菌率在99.9%以上。

外包材质: SUS304

尺寸: W1650×L2200×H1800mm(突出部分除外)

重量: 约850kgs (不含床架和平板车)

臭氧发生量: 700mg

臭氧浓度: 最大10ppm

CT值: 最大3,000ppm/min

容纳床数: 4台

电源: 单相 AC 220V±10% 12A 50HZ

排气量: 4m³/min

排气口: φ150mm(1个)

租赁服务流程 Rental service process

安心

舒心

温馨

在需要的时候，在需要的期间，给您提供实惠便利的租赁服务。

Provide convenient rental service for you when you need.

床垫
家居风
电动床

枕头
高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销商

清洗消毒设备

租赁服务

照护体系图
适老化改造

公司介绍

1 咨询介绍推荐适用产品
Consult, introduce recommend

您有任何需要或疑问，欢迎咨询！
对于您的咨询，我们有专业的客服人员详细地给您介绍有关信息。
专业的客服人员将根据使用客户的身体状况和生活环境，推荐最适合的护理产品。
选定产品之后，协商产品的送货日期、费用的支付方式等具体事宜。



2 签订合同
Sign contract

说明租赁合同内容，确认无异议后签约。



3 送货组装
操作说明
开始租赁
Deliver, Assemble
Operation Rent

按照客户的要求，有专业的工作人员送货上门，并进行产品的组装、
详细地说明产品的使用方法及注意事项。



4 后续服务
After-sale service

对长期租用的客户，提供定期回访、产品检查等后续细致服务。
产品出现问题时，及时进行修理或者更换。
根据客户身体状况的变化，介绍更加适合的租赁产品。



5 解约
终止租赁
Finish renting

希望终止租赁的客户，请拨打客服热线。根据客户的要求
即时受理解约手续。



6 产品回收
Collect

会有专业的工作人员上门回收租赁产品。



7 清洗消毒
检修维护
Clean, disinfect
exam, maintain

产品回收后，进行彻底地清洗、消毒、检修、维护，使产品得到再生。



8 仓储保管
Store

再生的产品经包装后，存放于专门的租赁产品仓储区域。



租赁服务示意图 Rental service diagram

3RSRSystem 【Recycle,Reuse,Reduce】


通过产品的重复使用,为环保做贡献!

We make contribution to environmental protection by products reuse.



在必要的时候,必要的期间租用产品,只付租用期内的费用。昂贵的多功能产品,廉价使用。
根据身体状况,租用合适的产品。不用时可以及时退还。


During the necessary period, you can rent the products and only pay for products for the rental period.
You can use the expensive and multifunctional products with cheap price.
Please rent suitable products according to physical condition. You can return in time if you don't use any more.

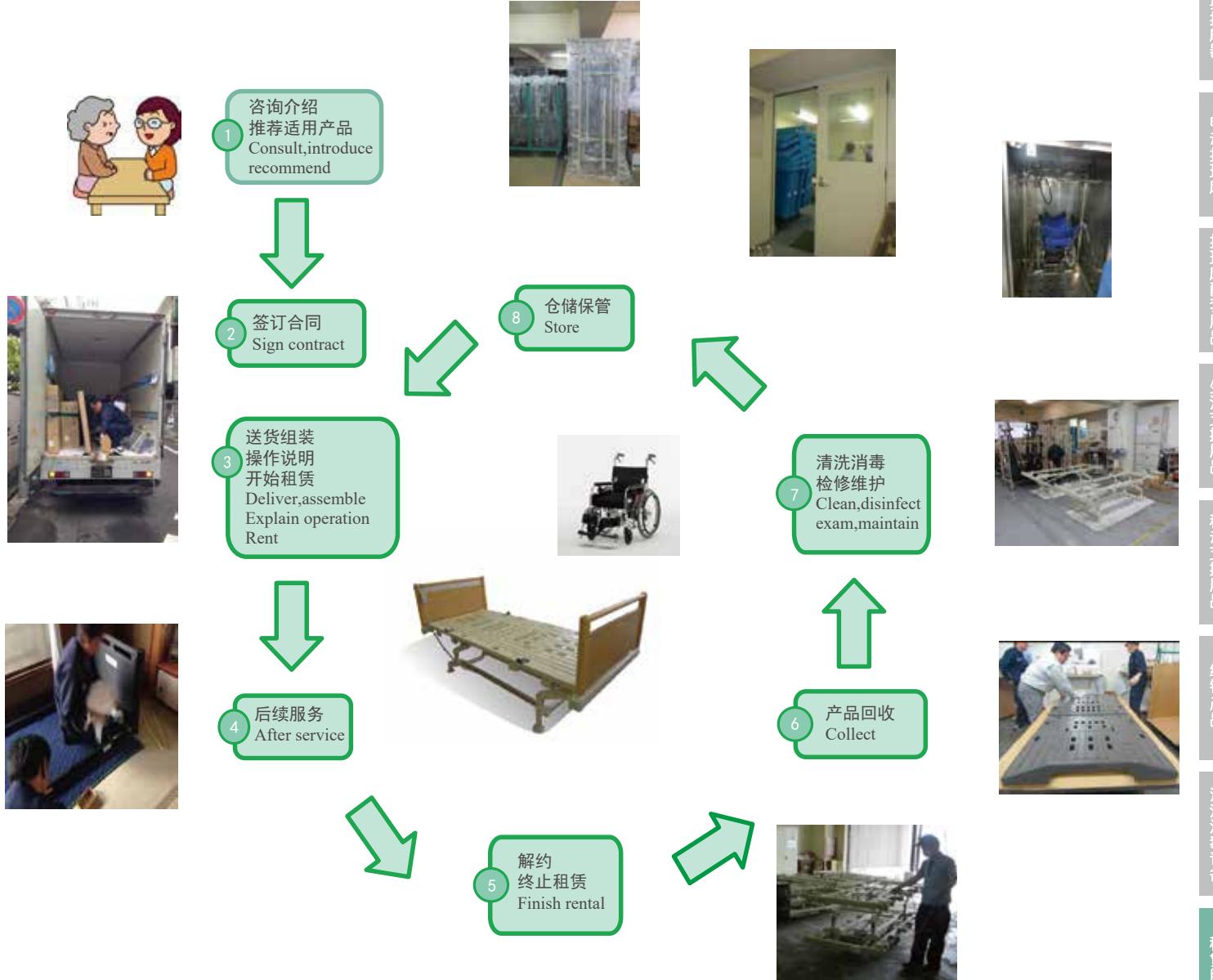

产品回收之后的流程 Process after collecting products (⑥~⑧)

如果您想开启租赁事业,
如果您还有顾虑或疑问,
敬请垂询!

法兰西床集团作为日本首家推行租赁服务事业的公司,在日本积累了30多年租赁事业零基础启动·发展的丰富经验,我们将全力助您的事业启航。

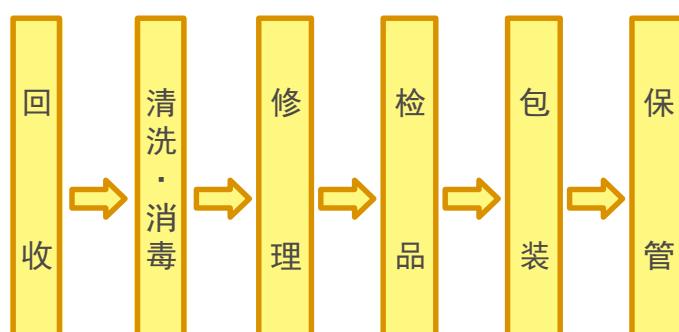

- 家居风电动床
- 高级羽绒被
- 全身按摩器
- 床垫电动护理床
- 床上用品
- 护理床配套用品
- 生活支援用品
- 移动支援用品
- 经销产品
- 清洗消毒设备
- 租赁服务
- 适老化改造图
- 公司介绍

适老化改造 Aging fitness transformation

床垫
家居风
电动床

枕高级羽绒被

全身按摩器

床垫
电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品

经销产品

清洗消毒设备



租赁服务

适老
化改造

公司介绍

通过适老化改造创造安心 安全 舒适的居住环境。适老产品重要！适老环境的改修同样重要
Create a safe and comfortable living environment for aging.

玄关 Entrance

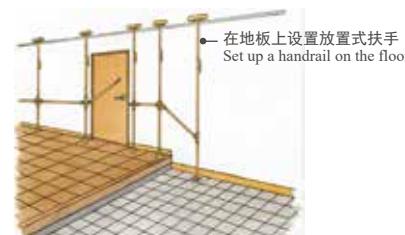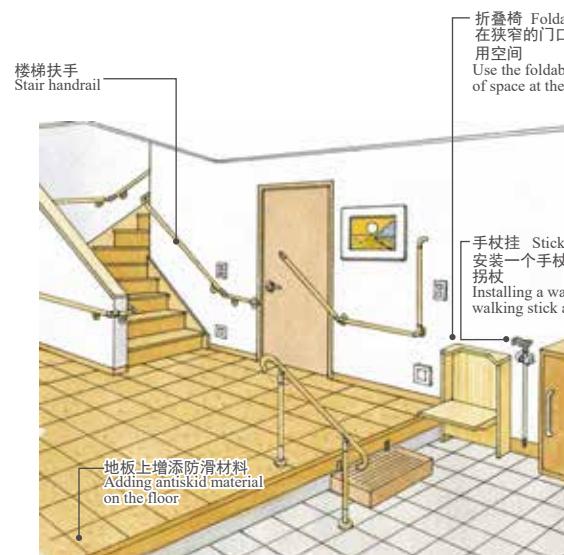

楼梯·走廊 Stairs & corridor




通过适老化改造创造安心 安全 舒适的居住环境。适老产品重要！适老环境的改修同样重要
Create a safe and comfortable living environment through residential renovation.


寝室·洗面所 Bedroom·Lavatory



卫生间 Toilet

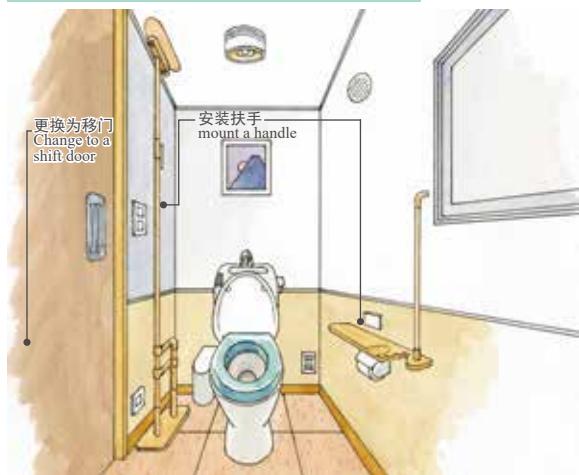

确保护理空间的厕所的尺寸
Ensure the size of the toilet in
the nursing space

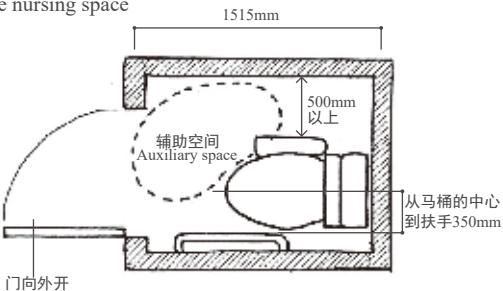


坐便器辅助扶手
Toilet auxiliary armrest
在使用坐便器时，如果有厕所辅助扶手的话就很方便了
It is very convenient to use armrest when you use toilet.



上吊门或是地面平坦的移门。
●把手、扶手是容易操作高度。
●锁是在紧急情况下可以从外面打开。
A hanging door or slide door.
●Handrails are on the suitable height to operate.
●The lock can be opened from the outside in an emergency.

照护体系图 Care system diagram

长者安享尊严人生 The elderly enjoy dignity life

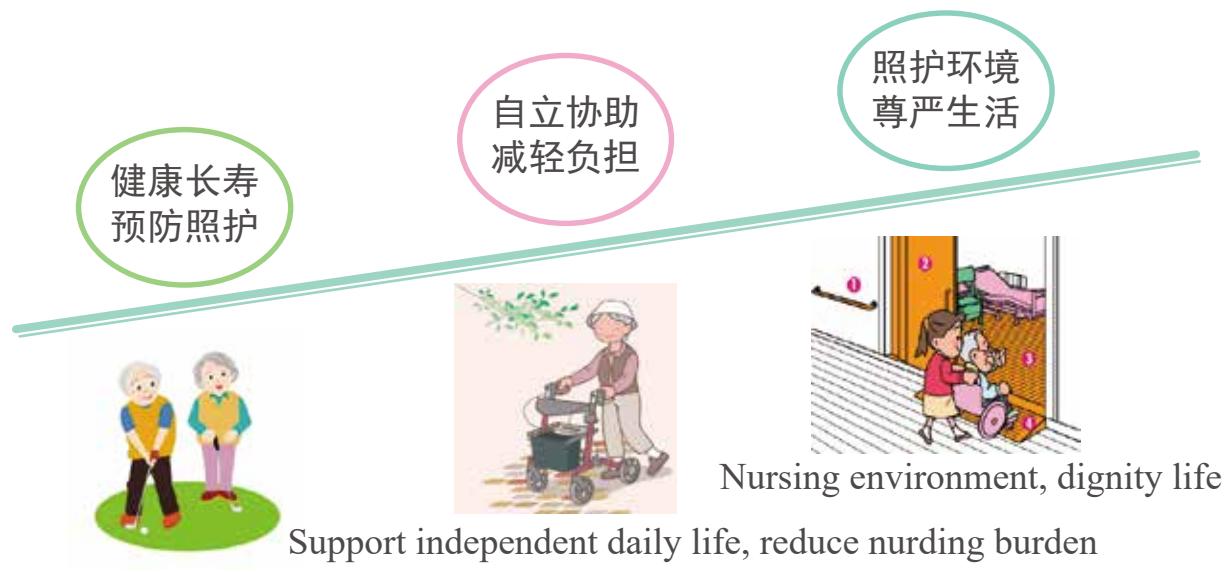

居家养老立体化服务体系的提案 Proposals for the system of residential care for the elderly




①帮助长者自立
Support independent daily life

②减轻照护负担
Reduce the burden of nursing

③安享尊严人生
Maintain dignity life

集团概要 公司概要 Group profile Campany profile

集团概要 Group profile

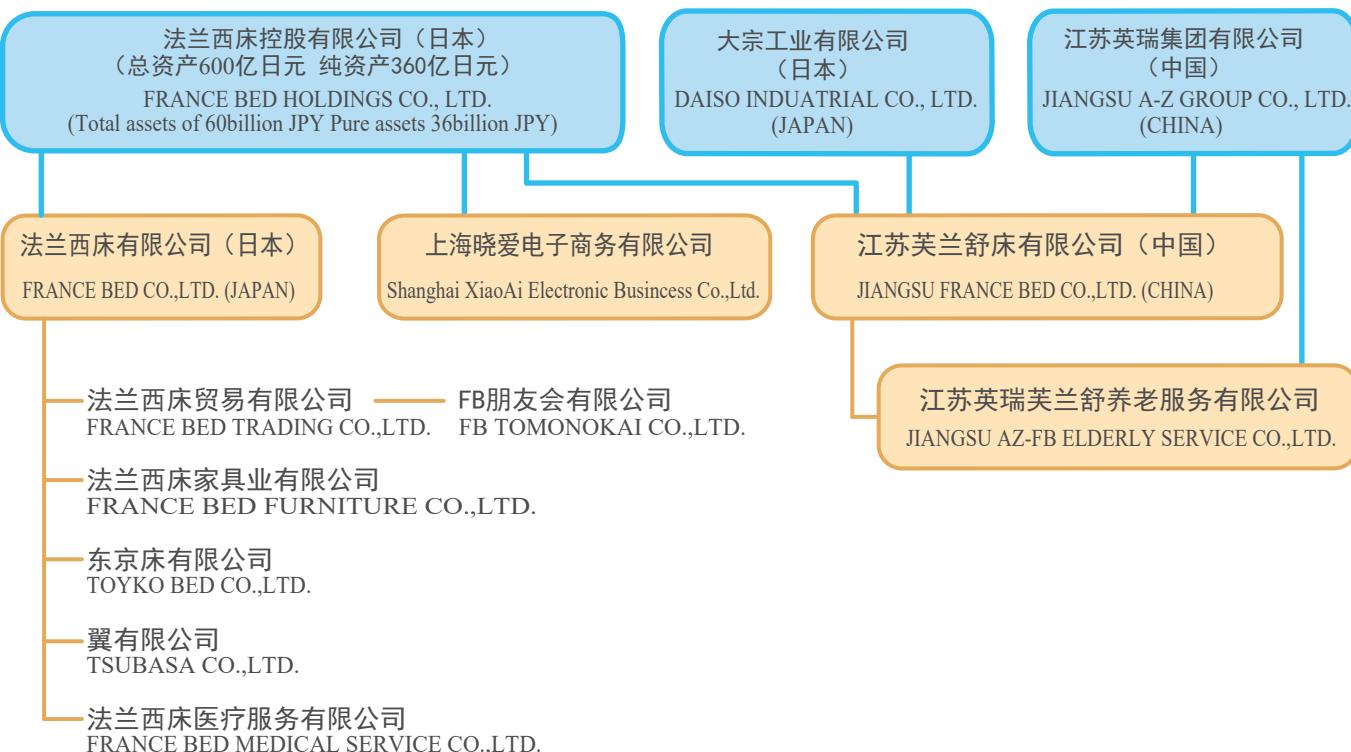

公司概要 Campany profile

公司名 Co. Name	江苏芙兰舒床有限公司			JIANGSU FRANCE BED CO., LTD.
地址 Add.	江苏省南通市崇川区通京大道89号			No.89, Tongjing-road, Nantong-city, Jiangsu-province, China
电话 Tel.	+86-(0)513-85222582	成立 Founded	2012年6月	June , 2012
网页 HP	http://www.jsfb-nt.com	邮箱 E-Mail	jsfb@jsfb-nt.com	
法人代表 Chairman	池田 茂 Shigeru Ikeda	投资额 Capital	2,000万人民币	20,000,000RMB
总经理 President	太田 茂夫 Ohta Shigeo	面 积 Proportion	办公室 Office: 144m ²	
投资方 Investor	日本法兰西床控股有限公司 江苏英瑞集团有限公司 日本大宗工业有限公司		体验中心 Experience Center: 138m ² 工厂 Factory: 1,580m ² 消毒维护中心 Maintenance Center: 576m ²	
业务内容 Business Activity	医用·护理设备产品、电动护理床、医用床垫、轮椅、便桶座椅、按摩器械的制造销售/五金配件的批发业务/ 进出口业务/商务咨询业务/医疗·护理设备租赁业务。 Manufacturing, selling, exporting and importing of medical or nursing-care beds, welfare equipments, beds, furniture, bedding, health equipments, etc.			

日本法兰西床集团建立于 1949 年，是开发制造高级家具、床上用品、医疗护理用品并提供销售、租赁服务的大型综合企业。法兰西床集团早在 1966 年上市于东京证券交易所 1 部，并于 1983 年在日本首次推出了护理床的租赁业务。此举极大地推进了护理床及福祉器械在一般家庭的普及。可以让行动日益不便的老人在任何时期都可以轻松选用合适的福祉器械。并且，循环使用维修检查过的器械也有利于环境保护。在护理保险制度下，租赁服务已经成为日本福祉器械市场的中流砥柱。法兰西床集团就是创造租赁体系的龙头企业。

江苏芙兰舒床有限公司正在引进的租赁模式，可以让中国的老龄者在需要的期间，支付低额费用，就能享有高性能，高品质的福祉器械。因此，江苏芙兰舒床有限公司为中国市场提供的不仅仅是产品，还带来了法兰西床集团在日本积累了 30 多年的租回收后的全面消毒·维护管理的丰富经验。

France Bed Holdings Co., Ltd. is established in 1949. It is a large integrated enterprise which not only develops and manufactures the up-grade furniture, bedding articles and medical nursing supplies, but also supplies sales and rental service. France Bed Holdings Co., Ltd. has been listed in Stock Exchanges of Tokyo early in 1966. In 1983, our France Bed Holdings pioneered the rental service of the nursing beds in Japan, which promote the popularization of the nursing beds and welfare equipment in the general family. Therefore, the elderly can choose the appropriate welfare equipment at any period. Besides, using the equipment cyclically is good for the environment protection. Under the nursing insurance system, rental service has been the mainstay in the welfare equipment market in Japan. France Bed Holdings Co., Ltd. is the leading enterprise that created the rental system.

Jiangsu France Bed Co., Ltd. has introduced the rental model so that the elderly in China can use the high-quality welfare equipment with low costs. Therefore, Jiangsu France Bed Co., Ltd. provides for the Chinese market not only the products, but also the rich experience of disinfection and maintenance accumulated by France Bed Holdings Co., Ltd. for about 30 years.

家居风电动床
高级羽绒被
全身按摩器

电动护理床

床上用品
护理床配套用品

生活支援用品

移动支援用品
经销产品

清洗消毒设备
租赁服务

适老化改造图
照护体系图

公司介绍